

Serie DS 610 G2

Gama de lavadoras desinfectadoras de instrumental con capacidad para 12 bandejas DIN



Steelco

Miele Group Member

Fabricante y proveedor mundial de soluciones de limpieza y esterilizador

Nacida de Steelco y Belimed, SteelcoBelimed es pionera en soluciones de flujo de trabajo estéril con innovación, fiabilidad y orientación al cliente. "Innovate with confidence" define nuestro compromiso con los productos y servicios de alta calidad, estableciendo nuevos estándares industriales en el Control de Infecciones y las Ciencias de la Vida.

Centrados en el cliente

Nuestro compromiso es comprender plenamente las necesidades y la satisfacción de los clientes. Nuestros productos y servicios están diseñados para satisfacer esas necesidades específicas, garantizando que cada decisión que tomamos beneficia a nuestros clientes para obtener los mejores resultados.

Innovación

Nuestra dedicación al progreso nos impulsa a buscar y adoptar constantemente nuevas ideas, tecnologías y métodos. Este compromiso garantiza que nuestros productos y servicios evolucionen y mejoren continuamente.

Sostenibilidad



Nuestro planeta, nuestra responsabilidad. En SteelcoBelimed, la sostenibilidad está integrada en todo lo que hacemos: desde la optimización de los procesos de producción y la reducción del consumo de energía hasta la creación de productos que apoyen el cuidado del medio ambiente. Para nosotros, proteger el futuro significa actuar hoy. Con integridad, determinación y un profundo respeto por las personas y el planeta.

Fiabilidad

Nuestro compromiso es alcanzar los más altos niveles de productividad mediante la optimización de procesos, recursos y operaciones. Al ofrecer sistemáticamente soluciones fiables, garantizamos la creación de valor al tiempo que minimizamos las ineficiencias. Nuestro objetivo es establecer relaciones duraderas basadas en la confianza, la integridad y el respeto mutuo mediante el cumplimiento fiable de nuestros compromisos.

DS 610 G2

Lavadoras desinfectadoras

Nuestras lavadoras desinfectadoras ofrece soluciones flexibles y de alta eficiencia para clínicas y centros de esterilización.

Diseñado para reducir el consumo de agua y energía, favorece una alta productividad y puede reducir el consumo de recursos en más de un 50%.

Proporciona un tratamiento completo: lavado, desinfección térmica y secado con filtro HEPA 14. Una bomba de velocidad variable optimiza la presión y el uso del agua en función de la carga y la fase del ciclo. Nuestras lavadoras desinfectadoras ofrecen seguridad, calidad, trazabilidad y bajos costes operativos.



DS 610 G2

Puerta/s manual/es abatible/s simple/s o pasante/s capacidad 12 bandejas DIN
volumen de la cámara 253 litros

DS 610 SL G2

Puerta/s automática/s deslizante/s simple/s o de paso
capacidad 12 bandejas DIN
volumen de la cámara 255 litros



Ventajas clave una combinación ganadora

Eficiencia ecológica

Las lavadoras desinfectadoras Steelco están diseñadas para ofrecer las mejores soluciones de su clase para reducir el consumo de energía y agua, proporcionando a los usuarios los costes operativos más bajos por carga.

Enfoque en la calidad del proceso

Steelco y Miele R&D trabajan juntos para desarrollar soluciones innovadoras que pueden mejorar la eficiencia del ciclo y la seguridad al tiempo que reduce el tiempo de proceso y el consumo de servicios públicos.

Flexibilidad, control y conectividad

La pantalla táctil en color de alta calidad, en combinación con la conexión Wi-Fi y Ethernet, garantiza una interacción intuitiva con el operador y un excelente control de todo el proceso. Además, Smarthub Orbit permite la visualización remota tanto en tiempo real como del rendimiento histórico del dispositivo.

Velocidad de proceso optimizada

Nuestro objetivo es proporcionar a los clientes los procesos de lavado y desinfección más rápidos posibles, de conformidad con las normas internacionales y locales. Consulte las opciones de DS 610 G2 para ahorrar tiempo y energía.

Sistema de carga flexible

Máxima flexibilidad combinada con un uso intuitivo.

El sistema modular de estantes de lavado ofrece tanto especialización como una gran flexibilidad a la hora de cargar la lavadora desinfectadora.

Múltiples opciones de carga

Una gama completa de carros de transferencia, cintas transportadoras y ventanas o escotillas de paso completan el sistema para optimizar su flujo de trabajo.

Fácil instalación Plug & Play

A pesar de su capacidad de 12 DIN, la DS 610 G2 es compacta y plug-and-play, ya que sólo requiere alimentación eléctrica, agua y desagüe.

Está diseñado para pasar a través de puertas y ascensores, con un zócalo con ruedas para facilitar su colocación. Ideal para clínicas y centrales de esterilización de tamaño medio, el modelo de puerta corredera admite la carga y descarga automatizadas.



Eficiencia y sostenibilidad

Unidos

Acelerar el ciclo ahorrando tiempo y energía

Gracias a la disponibilidad de la cuba precalentada de la opción de ciclo rápido, es posible ahorrar tiempo y disponer antes de los artículos reprocesados sin merma de la calidad del proceso. El tiempo de calentamiento de la fase de aclarado final puede reducirse en un 80% en condiciones de uso medias.



Lavado principal

Máximo rendimiento de lavado con una limpieza a fondo y rápida.

Fase de aclarado

Rendimiento de aclarado seguro con un consumo de agua reducido.

Niveles inigualables de eficiencia, reducción del consumo de energía y agua con los costes operativos más bajos por carga.

La bomba de velocidad variable permite ajustar la presión de circulación (máximo rendimiento cuando es necesario) y el consumo de agua (conservación del agua cuando es posible). Por lo tanto, el rendimiento de lavado es siempre óptimo y puede controlarse con precisión.

Secado forzado con aire filtrado

El secado con aire caliente permite obtener productos perfectamente secos. Una unidad de filtro HEPA H14 garantiza resultados libres de contaminación. El sensor de humedad opcional garantiza un secado eficaz de los productos con el mínimo tiempo y energía necesarios.

Materiales de primera calidad, dispositivos hechos para durar

La cámara, los brazos rociadores y los filtros de sumidero están fabricados en acero inoxidable AISI 316 L electropulido de alta calidad; una garantía de limpieza, fiabilidad a largo plazo y fácil reciclaje del producto al final de su vida útil. El bastidor estructural de la DS 610 G2 está fabricado en acero inoxidable de alta calidad para garantizar una vida útil más larga.




Resumen de opciones de eficiencia y sostenibilidad

- Limpieza Power Pulse
- Tanque de precalentamiento
- Secado dinámico
- Condensador de vapor



DS 610 G2

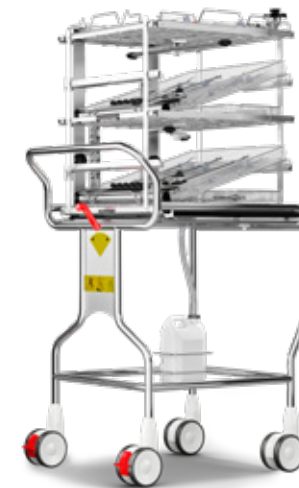

DS 610 SL G2

Flexibilidad en las opciones posventa

Steelco ofrece kits de adaptación a los dispositivos existentes para adaptarse a las demandas:

- Sensor de conductividad para obtener la mejor calidad en los resultados del aclarado final
- Bomba de desagüe para adaptarse a desagües altos o remotos
- Fase de secado controlada por sensor de humedad
- ... y mucho más



Requisitos de servicio minimizados

Mantenimiento muy simplificado y rentable.
Acceso frontal de servicio a todos los componentes. Las unidades están equipadas con rodillos para un posicionamiento rápido y sencillo y pies fijos.

Calidad de proceso

Unidos

Con un tamaño reducido, la gran capacidad de la serie DS 610 G2 no afecta al espacio del departamento.

Instalación simplificada "plug and play" que sólo necesita conexiones flexibles a la red eléctrica, entrada de agua y desagüe.

Flexibilidad en la configuración

Dependiendo de las utilidades disponibles, Steelco DS 610 G2 y DS 610 SL G2 pueden configurarse para:

- calentamiento eléctrico
- calentamiento por vapor externo indirecto que reduce la necesidad total de suministro eléctrico
- calefacción mixta que permite pasar de la calefacción por vapor a la eléctrica como solución de reserva.


Hay disponible como opción un descalcificador de agua integrado que puede complementarse con agua tratada externamente en caso de que la calidad del agua entrante sea deficiente o de que haya departamentos muy ocupados.

La lavadora es adecuada para instalaciones con o sin ventilación con opciones de condensación de vapor.

Listo

El estado del dispositivo y, por tanto, la disponibilidad de la lavadora de instrumentos se muestran claramente mediante el cambio de color de la luz de la cámara.

Blanco: ciclo en curso - Verde: proceso finalizado OK
- Rojo: alarma activa

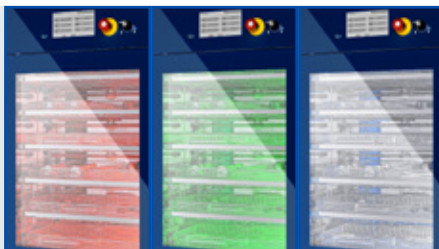



Flexibilidad y control

Unidos

El gran panel de control con pantalla táctil de 7" (en ambos lados para los dispositivos de doble puerta) facilita el control del dispositivo con información brillante y fácil de leer incluso a distancia: una ayuda intuitiva y práctica para los operarios en sus tareas diarias. Además, el diseño bien pensado y fácil de usar es coherente en toda la gama de nuestros dispositivos, lo que favorece un funcionamiento intuitivo y unos procesos fiables.

Una interfaz fácil de usar


El gran panel de control con pantalla táctil de 7" facilita el control del dispositivo con información brillante y fácil de leer incluso a distancia. Los operadores reciben ayuda en cada paso con comandos claros e intuitivos.

Modo de servicio técnico

Las lavadoras desinfectadoras están diseñadas para agilizar el mantenimiento. Un panel sinóptico de fácil lectura permite una visión en profundidad del estado de la máquina y los componentes, lo que acelera las intervenciones de servicio.

Rendimiento de lavado y comprobación de la calidad del aclarado final

La HMI muestra los parámetros de presión de lavado y conductividad del agua durante las fases relevantes del proceso.

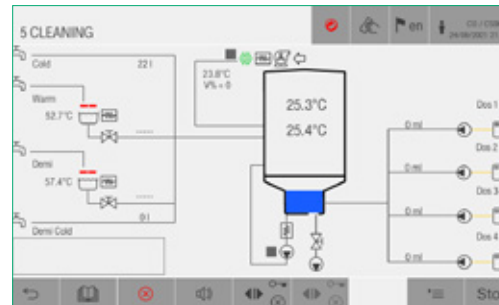


Panel sinóptico de fácil lectura

Niveles de acceso de usuario

Cinco niveles de acceso garantizan que sólo el personal formado tenga acceso a funciones específicas: operador, jefe de departamento, técnico de servicio en las instalaciones del cliente, técnico de servicio autorizado y fabricante.

Almacenamiento de datos de ciclo

Los datos del ciclo se almacenan y están disponibles en la impresora integrada opcional y, si el dispositivo está conectado a la red, los datos se pueden enviar a un sistema de trazabilidad centralizado.

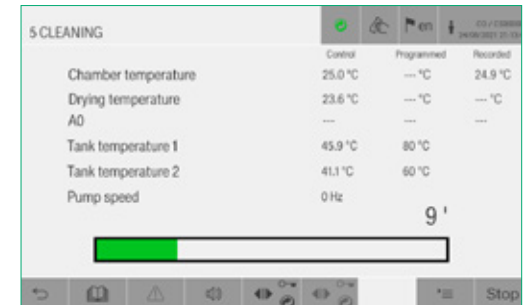

Estado de los ciclos y mensajes de alarma muy visibles.

Solución de digitalización

Software de gestión y seguimiento

Garantice la disponibilidad de los instrumentos en el lugar y el momento adecuados, re-procesados según la norma correcta en el menor tiempo posible y al menor coste.

SmartHub Connect


SmartHub Connect es una solución de software local que recopila datos de equipos compatibles y los envía a un sistema de seguimiento de instrumentos. Los usuarios obtienen una transparencia total a través de un cuadro de mandos visual que muestra el estado de los programas y ciclos de cada máquina conectada. El cuadro de mandos de SmartHub Connect es una potente herramienta para una gestión simplificada y eficaz de la central de esterilización.

SmartHub Flow

SmartHub Flow es nuestro software basado en web y preparado para la nube para la trazabilidad de conjuntos y la localización de instrumentos. Diseñado para hacer frente a los retos que plantea la creciente complejidad de la central de esterilización, el software proporciona una herramienta de supervisión precisa y segura que permite optimizar progresivamente el flujo de trabajo manteniendo altos estándares de productividad. La información recopilada sobre la producción, el envío y la gestión de almacenes permite un análisis y una cuantificación precisos de los costes, lo que mejora la eficiencia económica. El software cumple normas de seguridad internacionales como ISO 27001 e ISO 13485.

SmartHub Orbit

SmartHub Orbit es nuestra innovadora aplicación basada en web que convierte los datos de las máquinas en información procesable y valor añadido. Todos los datos relevantes de los equipos y los estados de los ciclos son accesibles desde cualquier dispositivo, en cualquier lugar y en cualquier momento. Esto proporciona a los responsables de la central de esterilización un control total y revoluciona su forma de trabajar. SmartHub está diseñado para apoyar a todo el equipo de la central de esterilización con funciones y actualizaciones en continua evolución, como aprendizaje electrónico, resolución de problemas, digitalización de procesos y análisis avanzados.

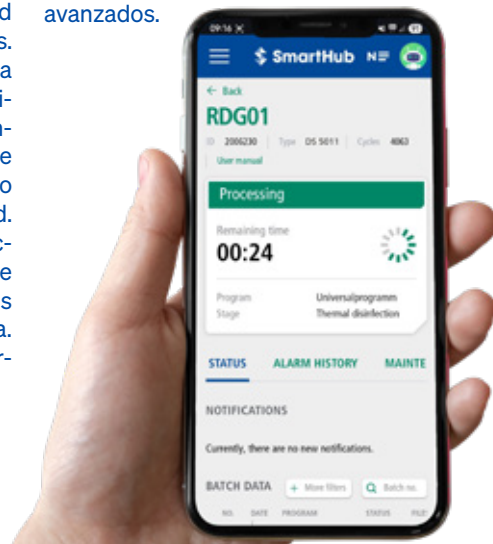

Mejora de la calidad del proceso

Se consigue un rendimiento de limpieza óptimo y fiable combinando el PPC con la rotación del brazo de lavado y la supervisión de la presión del circuito, al tiempo que se mide la conductividad del agua para detectar cualquier residuo químico o suciedad.



El sistema patentado Power Pulse Cleaning (PPC) de Steelco reduce o elimina el pre-tratamiento manual de instrumentos huecos complejos, garantizando la seguridad, la uniformidad y la eficacia.



Utiliza ráfagas de aire de grado médico durante el flujo de agua para crear turbulencias y mejorar la limpieza en el interior de lúmenes, juntas y uniones.

Durante el secado, los pulsos de aire expulsan el agua residual, mejorando el rendimiento del secado.

Limpieza Power Pulse

El módulo PPC permite la conexión de hasta 11 instrumentos huecos complejos.

Los principales fabricantes de instrumental quirúrgico han avalado el sistema PPC de Steelco como una tecnología eficaz que permite omitir o reducir en gran medida las fases de prelimpieza manual de su instrumental más crítico.

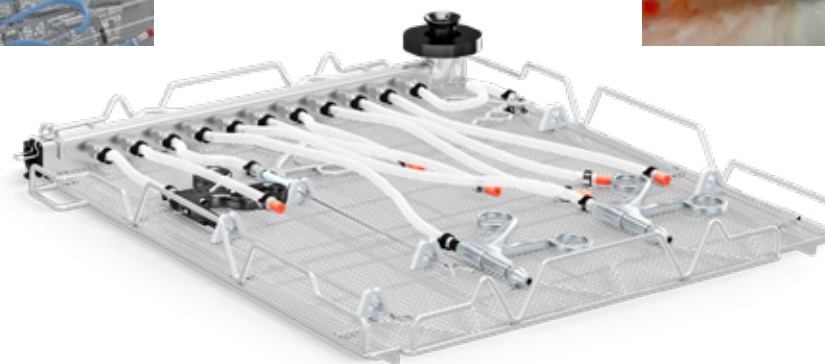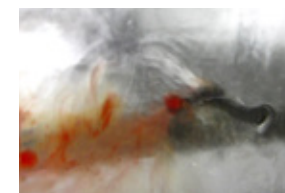

Filtración de alto nivel para módulos de estanterías de lavado

Filtro tubular A 800 para el reprocesamiento de instrumental hueco.

Filtro de malla de acero inoxidable para unidades móviles, para partículas $\geq 0,07$ mm.

Un único filtro fácil de limpiar para todas las conexiones de lúmenes.







Sistema de carga flexible

Carros de lavado, módulos y conectores

Flexible Loading System permite la preparación de instrumentos en módulos individuales y una carga facilitada de los carros, mejorando la seguridad y la ergonomía.

Carro de lavado C1802



Es la unidad básica del sistema. Puede equiparse con módulos y niveles adicionales, como se muestra a continuación. En las páginas siguientes se ilustran las configuraciones más comunes y se presentan las configuraciones estándar y los accesorios para la conexión de los instrumentos.

La configurabilidad del carro de lavado C1802 permite optimizar aún más el espacio, que suele emplearse para el almacenamiento de carros especializados, lo que reduce el espacio ocupado en el interior de los locales.



C1804 Nivel adicional con brazo rociador



C1809
Módulo de limpieza Power Pulse para 11 instrumentos MIS, longitud hasta 500 mm / 19.68"



C1806
Módulo para reprocesar instrumentos de CMI de hasta 480 mm de longitud



C1808
Módulo para reprocesar instrumental oftalmológico con una longitud de hasta 480 mm / 18.90". 18 conexiones



C1805
Módulo para reprocesar instrumentos MIS con una longitud de hasta 400 mm / 15.75".




C1816
Módulo para reprocesar instrumental dental hueco nº 22

Guía de configuración y Ejemplos Configurables



----- Nivel extraíble con brazo de lavado
 _____ Nivel fijo con brazo de lavado

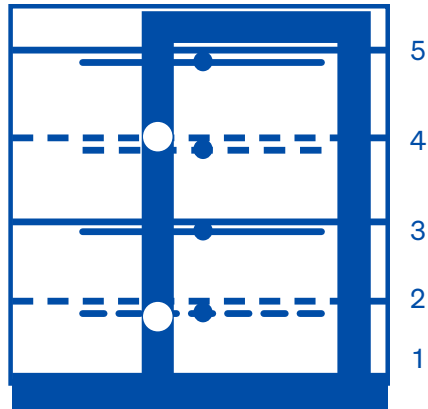

Posible combinación de módulos:

- 1 x C1806* o 2 x C1805
- 1 x C1804 o 1 x C1804 + 2 x C1805
- 1 x C1806* o 2 x C1805
- 1 x C1804 o 1 x C1804 + 2 x C1805
- 1 x C1809 o + 2 x C1805



1 x C1809



2 x C1806



2 x C1805



45 conexiones para instrumentos huecos



1 x C1804



1 x C1806



3 x C1805



29 conexiones para instrumentos huecos
 + 4 bandejas DIN



2 x C1808



36 conexiones para instrumentos huecos
 + 4 bandejas DIN

* No compatible cuando el nivel superior extraíble está presente



Sistema de carga flexible

Carros de lavado, módulos y conectores

Flexible Loading System permite la preparación de instrumentos en módulos individuales y una carga facilitada de los carros, mejorando la seguridad y la ergonomía.

Carro de lavado C1817



El C1817 puede equiparse con módulos y niveles adicionales como se muestra a continuación.

En las páginas siguientes se ilustran las configuraciones más comunes y se presentan las configuraciones estándar y los accesorios para la conexión de los instrumentos.

La posibilidad de configurar el carro de lavado C1817 permite optimizar aún más el espacio, ya que suele emplearse para el almacenamiento de carros especializados, lo que reduce el espacio que ocupan en el interior de los recintos.



C1804 Nivel adicional con brazo rociador



C1819 Módulo para fresas ortopédicas



C1820 Módulo para intubación y mascarillas 8 posiciones



C1830 Cesta para biberones 18 posiciones



C1831 Bandeja de malla con tapa para biberones chupetes y anillas 36 posiciones




C1821 Módulo para material de intubación 8 posiciones

Guía de configuración y Ejemplos Configurables

----- Nivel extraíble con brazo de lavado

———— Nivel fijo con brazo de lavado

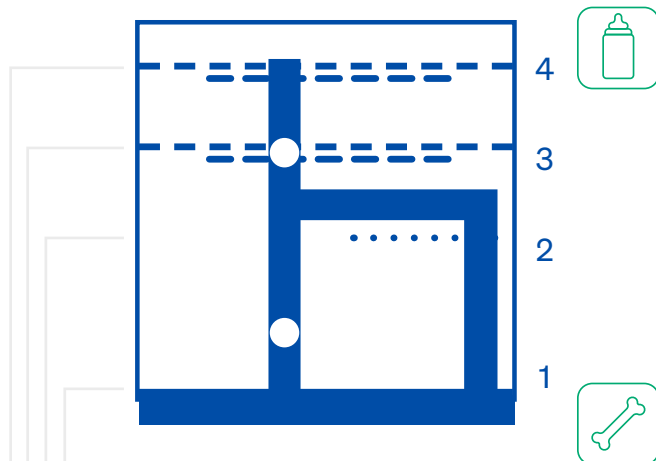

Posible combinación de módulos:

2 x C1830 o
2 x C1819 o
2 x C1820

2 x C1830 o
2 x C1819* o
2 x C1821

1 x C1804

1 x C1804 o
1 x C1804 + 2 x C1831

* No compatible cuando el nivel superior extraíble está presente



Carro de lavado para instrumental de cirugía robótica

Steelco también ofrece soluciones de reprocesamiento para instrumental quirúrgico robótico de otras marcas con carros de lavado específicos o modulares. Consúltenos para conocer las soluciones de reprocesamiento validadas más recientes.

Carro de lavado C1815

Carro de lavado para instrumentos de cirugía robótica y endoscopio de la serie daVinci Xi. Adecuado para alojar la cámara portátil Summit Medical y las bandejas Single Scope 2.0 o Single Scope Plus.



Las marcas y logotipos de DaVinci son marcas registradas de Intuitive Surgical, Inc.



Carros de lavado de niveles fijos

C1801

Carro de lavado de 6 niveles con brazos de lavado.
Hasta 12 bandejas DIN 1/1.

Espacio útil:

Todos los niveles ~ 60 mm



C1810

Carro de lavado de 3 niveles con brazos de lavado.
Hasta 6 bandejas DIN 1/1
Hasta 3 bandejas SPRI I.

Espacio útil:

Nivel 3 ~ 175 mm / 6,8"
Nivel 2 ~ 185 mm / 7,2"
Nivel 1 (inferior) ~ 185 mm / 7,2"



C1812

Carro de lavado de 5 niveles con brazos de lavado.
Hasta 10 bandejas DIN 1/1.
Hasta 5 bandejas SPRI I.

Espacio útil:

Todos los niveles ~ 85 mm / 3,3"



C1811

Carro de lavado de 4 niveles con brazos de lavado.
Hasta 8 bandejas DIN 1/1.

Espacio útil:

Nivel 4 ~ 100 mm
Nivel 2 y 3 ~ 130 mm / 5,1"
Nivel 1 (inferior) ~ 120 mm / 4,7"



C1814

Carro de lavado de 2 niveles con brazos de lavado.
Dedicado a zapatos/zuecos de quirófano OP.

Espacio útil:

Todos los niveles ~ 300 mm / 11,8"



C1825

Inserto con 30 soportes para zapatos/zuecos de quirófano o artículos de anestesia.



C1826

inserto con 15 soportes para zapatos/zuecos de quirófano o artículos de anestesia.



Carros de lavado de niveles extraíbles

C1803

Carro de lavado de 5 niveles con brazos de lavado.
Hasta 10 bandejas DIN 1/1.
Hasta 5 bandejas SPRI I.
Los niveles son desmontables.

Espacio útil:

Sin 4 niveles ~ 650 mm / 25,59"
Sin 3 niveles ~ 450 mm / 17,71"
Sin 2 niveles ~ 380 mm / 14,9"
Sin 1 nivel ~ 290 mm / 11,41"
Nivel 5 ~ 75 mm / 2,9"
Nivel 2,3,4 ~ 80 mm / 3,1"
Nivel 1 (inferior) ~ 93 mm / 3,6"



C1842

soporte multiusos para cubetas, bandejas y casettes, pasadores altos.



C1841

soporte multiusos para cubetas, bandejas y casettes, clavijas bajas.



C1828

inserto con 12 soportes para zapatos/zuecos de teatro OP de tallas grandes.



Carros de lavado especializados

C1813

Carro de lavado MIS de 3 niveles provisto de 2 brazos de lavado. longitud máxima del instrumento: ~ 400 mm / 15.74"

Espacio útil:


Nivel 3 ~ 412 mm / 16,22"
Nivel 2 ~ 63 mm / 2.48"
Nivel 1 (inferior) ~ 400 mm / 15.74"



C1818

Carro de lavado de anestesia provisto de:

- 12 soportes para tubos de respiración
- 4 boquilla inyectora para bolsa de respiración
- 10 Boquilla inyectora para material de intubación
- 3 Soporte para tubos respiratorios de silicona

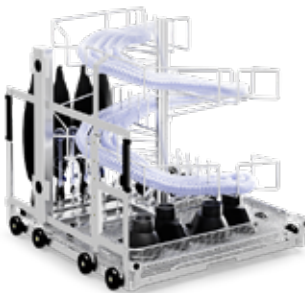

Carro flexible para artículos voluminosos

El carro de lavado de un solo nivel C1822 puede equiparse con insertos específicos para cualquier necesidad de limpieza de contenedores DIN, atascos hospitalarios, platos de riñón.

C1822

Carro de lavado de un solo nivel adecuado para insertos.

Altura útil: 672 mm/26,45".



C1823

inserto: hasta 2x contenedores DIN de 250 mm de altura con tapa.



C1842

inserto: hasta 3 contenedores DIN de 150 mm de altura con tapa.



C1825

Inserto con 30 soportes para zapatos/zuecos de quirófano o artículos de anestesia.



C1826

inserto con 15 soportes para zapatos/zuecos de quirófano o artículos de anestesia.




E 492

Inserto para hasta 9 contenedores con forma de riñón, profundidad máxima de 50 mm.



Practicidad y eficacia hasta en los detalles más pequeños

Las imágenes representan sólo algunos ejemplos del avanzado diseño de nuestros accesorios.

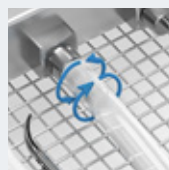

Sistema de manguera giratoria antitorsión para facilitar la conexión del puerto de instrumentos y evitar restricciones en el flujo de agua.




Soportes con distintos puntos de contacto para una cobertura completa del lavado de instrumental

Sistema de carga flexible

C1802 Composición de los módulos

C1809

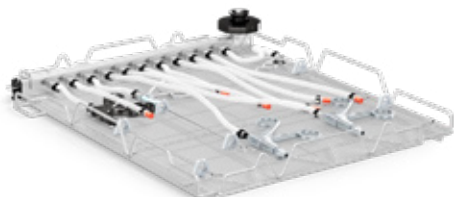


Medidas totales Anx-PrxAl:

530x600x91 mm /
20,86x23,62x3,58"

Espacio útil:

A 500 mm / 19,68"
B 490 mm / 19,29"

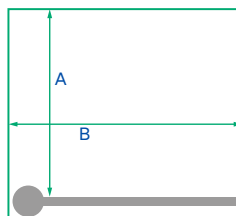

Artículos suministrados:

11 mangueras de silicona con conexión Luer Lock
50 x E 476, soportes para microinstrumentos, Ø 4 a 8 mm, para uso en bandejas de malla con rejilla de 5 mm
50 x E 479, soportes para microinstrumentos de Ø 4 mm, para uso en bandejas de malla con rejilla de 5 mm

C1805




Medidas totales Anx-PrxAl:

227x521x93 mm /
8,93x20,51x3,66"

Espacio útil:

A 403 mm
B 215 mm / 8,46"

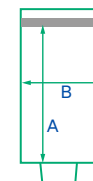

Artículos suministrados:

1 x A 855, manguera de silicona con adaptador M Luer Lock para F Luer Lock, longitud 160 mm
2 x E 362, tapones ciegos
1 x E 447, adaptador F Luer Lock para M Luer Lock
1 x E 449, adaptadores M Luer Lock para F Luer Lock
2 x E 452, boquilla inyectora, 60 mm de longitud, Ø 2,5 mm
1 x E 472, abrazadera de resorte para inyectores Ø 4 mm
1 x E 453 boquilla inyectora con abrazadera de sujeción, 100 mm de longitud, Ø 4 mm

C1806




Medidas totales Anx-PrxAl:

530x539x79 mm /
20.86x21.22x3.11"

Espacio útil:

A 480 mm / 18.90"
B 383 mm / 15,08"
C 480 mm / 18.90"
D 470 mm / 18.50"

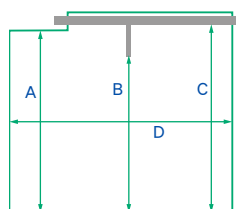

Artículos suministrados:

2 x A 856, mangueras de silicona con adaptador M Luer Lock para F Luer Lock, longitud 300 mm
1 x E 454 boquilla de inyección Ø 8,0 mm, chorros radiales, H. 152 mm
2 x E 456 Soporte de resorte para mantener abierto el instrumento MIS
1 x E 464 Soporte p. boquillas inyectoras E 454 Ø 13 x 65 mm
1 x E 336, manguito de irrigación, longitud 121 mm, Ø 11 mm, 2 x E 362, tapones ciegos
6 x E 442 manguitos de irrigación para instrumentos Ø 4 - 8 mm, longitud 121 mm, Ø 11 mm, tapón con abertura Ø 6 mm
1 x E 443, casquillo para instrumentos Ø 8 - 8,5 mm, longitud 121 mm, Ø 11 mm, tapa con abertura Ø 10 mm

C1808




Medidas totales Anx-PrxAl:

530x539x79 mm /
20.86x21.22x3.11"

Espacio útil:

A 477 mm / 18.78"
B 480 mm
C 468 mm / 18.42"
D 236 mm / 9.29"
E 203 mm / 7.99"

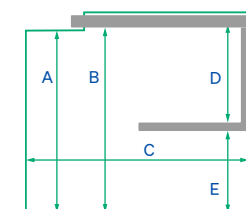

Artículos suministrados:

2 x A 856, mangueras de silicona con adaptador M Luer Lock para F Luer Lock, longitud 300 mm
10 x A 855, mangueras de silicona con adaptador M Luer Lock para F Luer Lock, longitud 160 mm
1 x E 362, tapones ciegos, 3 x E 449, adaptadores M Luer-Lock para F Luer-Lock
1 x E 452, boquilla inyectora, longitud 60 mm, Ø 2,5 mm, 1 x A 800, filtro tubular reutilizable, longitud 405 mm, Ø 22,5 mm
11 x E 447, adaptadores F Luer-Lock para M Luer Lock, 11 x E 517, adaptadores M Luer-Lock para F Luer Lock
10 x E 476, soportes para microinstrumentos, Ø 4 a 8 mm, para uso en bandejas de rejilla con rejilla de 5 mm
10 x E 477, soportes para microinstrumentos, para uso en bandejas de rejilla con rejilla de 5 mm

Sistema de carga flexible

Composición de los módulos C1817

C1816



Medidas totales Anx-PrxAl:
189x523x85 mm /
7.44x20.59x3.34"

Artículos suministrados:
22 x A 803, soportes para
contra-ángulos den-
tales, piezas de mano y
turbinas

C1819



Medidas totales Anx-PrxAl:
245x518x239 mm /
9.64x20.39x9.40"

Artículos suministrados:
6 manguitos de extensión
para fresas de médula
ósea

C1820



Medidas totales Anx-PrxAl:
143x518x352 mm /
5.62x20.39x13.85"

Artículos suministrados:
8 boquillas inyectoras
E 466 para bolsa de
respiración

C1821



Medidas totales Anx-PrxAl:
149x518x143 mm /
5.86x20.39x5.62"

Artículos suministrados:
8 inyectoros A 833

Accesorios opcionales

															
C1805		•	•	•			•	•	•	•	•	•		•	•
C1806	•				•		•	•	•	•	•	•		•	•
C1808	incluido						•	•	•	•	•	•		•	•
C1809	•						•	•	•	•	•	•	•	•	•
C1816	incluido						•	•	•	•	•	•		•	•

Carros de transferencia y automatismos de carga

Diseñado para satisfacer las necesidades de clínicas y centros de esterilización de tamaño medio, el DS 610 G2 presenta una gama completa de soluciones para la manipulación de carros de lavado con detalles centrados en mejorar la ergonomía de uso. Además, el sistema incluye trampillas de doble puerta, ventanas y transportadores intermedios para el retorno de los carros de lavado.

T647
carro de transferencia regulable en altura



T641
carro de transferencia de altura fija



PT 2P G2 610G2
Trampilla de doble puerta



PT 1P G2 610G2
Trampilla de una puerta



Capacidad y dimensiones Disposiciones y configuraciones

Modelo	Altura	Cámara (HxPxA)			Total (HxPxA)	
		Profundidad	Anchura	Altura	Profundidad	Anchura
DS 610 G2 (una puerta)	728 mm	610 mm	570 mm	1940/2395* mm	700 mm	650 mm
DS 610 G2 (dos puertas)	728 mm	610 mm	570 mm	1940/2395* mm	700 mm	650 mm
DS 610 SL G2 (una puerta)	728 mm	615 mm	570 mm	1940/2395* mm	700 mm	650 mm
DS 610 SL G2 (dos puertas)	728 mm	615 mm	570 mm	1940/2395* mm	700 mm	650 mm

Altura de carga: 850 mm sobre el suelo acabado.
(*) La altura total del aparato depende de la presencia de condensador de vapor, de su tipo y de su combinación con otras opciones.

Máximo rendimiento con los expertos de SteelcoBelimed

Planes de servicio

Más vale prevenir que curar. Nuestros planes de servicio a medida garantizan el máximo tiempo de actividad de los equipos mediante un mantenimiento preventivo personalizado basado en el uso de la máquina. Tanto si confía en técnicos internos como en nuestro equipo de expertos, las distintas soluciones pueden incluir visitas programadas de mantenimiento preventivo, reparaciones y piezas, en función de las opciones elegidas. Las mejoras opcionales, como la limpieza de la cámara y la supervisión de la calidad del agua, ayudan a optimizar el rendimiento y a controlar los costes, manteniendo sus operaciones en funcionamiento de forma fluida y eficiente. Pregunte a su representante local de SteelcoBelimed por la gama de servicios ofrecidos en su zona.

Academia SteelcoBelimed

La Academia SteelcoBelimed ofrece una amplia gama de opciones de formación adaptadas a las necesidades específicas de los profesionales de la central de esterilización. Las modernas instalaciones de formación de Riese, Italia, dan servicio a las divisiones de SteelcoBelimed Control de Infecciones, Laboratorio e Investigación Biomédica (BMR) con una impresionante capacidad para formar hasta 1.100 técnicos de servicio al año. La Academia representa nuestro compromiso con el avance de todo el campo del procesamiento estéril. Los profesionales sanitarios que se formen aquí obtendrán conocimientos que van más allá del funcionamiento de los equipos para abarcar la ciencia del control de infecciones y la optimización de los flujos de trabajo del procesamiento estéril. Estos conocimientos se traducen directamente en una mejora de la seguridad del paciente y de la eficacia operativa en sus instalaciones.

Contratos de coste total de propiedad (TCO)

Nuestros contratos TCO ofrecen una solución de servicio plurianual y de coste fijo que garantiza la estabilidad presupuestaria y el valor a largo plazo. Al fijar las tarifas y minimizar la exposición al aumento de los costes, estos contratos proporcionan una planificación financiera clara. Ideales para ampliar la vida útil de sus equipos, estos paquetes todo incluido reducen los costes operativos, protegen las inversiones y respaldan los objetivos de sostenibilidad durante todo el ciclo de vida de los equipos.

Digitalización en las operaciones de servicio

Nuestras soluciones digitales proporcionan acceso a los datos de los equipos en tiempo real, ayudando a los equipos de servicio a supervisar el rendimiento e identificar más rápidamente cualquier problema potencial. Los cuadros de mando claros y las alertas automatizadas permiten que el mantenimiento sea más predictivo y eficiente. Estas herramientas mejoran la planificación, reducen los tiempos de inactividad imprevistos y simplifican el cumplimiento de las normativas. Mediante la integración de flujos de trabajo digitales en las rutinas de servicio, las instalaciones pueden mejorar la fiabilidad y tomar decisiones más informadas basadas en el uso real y las tendencias de rendimiento.

SteelcoBelimed

Miele

Group Member

Innovate with confidence

DC-PD-01-Steelco DS 610 G2 ES Rev.05.pdf

Los productos ofrecidos a la venta pueden diferir de los descritos o ilustrados en este folleto debido a cambios posteriores en la producción o/y configuraciones opcionales.

Los productos y las especificaciones técnicas están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte a su distribuidor Steelco para obtener la información más reciente.

Steelco S.p.A.
Via Balegante, 27 - 31039
Riese Pio X (TV) - Italy

steelcobelimed.com

CE₀₀₅₁*

* Sólo para productos incluidos en el
certificado 065/MDR