

Armoires de séchage pour instruments chirurgicaux et d'anesthésie



Steelco

Miele Group Member

Fabricant et fournisseur mondial de solutions de nettoyage et de stérilisation

Née de Steelco et Belimed, SteelcoBelimed est un pionnier des solutions de flux de travail stérile grâce à l'innovation, à la fiabilité et à l'orientation client. "Innovate with confidence" définit notre engagement à fournir des produits et des services de haute qualité, établissant de nouvelles normes industrielles dans le domaine de la lutte contre les infections et des sciences de la vie.

Centrage sur le client

Notre engagement à comprendre pleinement les besoins et la satisfaction de nos clients est une priorité.

Nos produits et services sont conçus pour répondre à ces besoins spécifiques, en veillant à ce que chaque décision que nous prenons profite à nos clients pour obtenir les meilleurs résultats.

Efficacité

Nous nous efforçons d'atteindre une productivité maximale en optimisant nos processus, nos ressources et nos opérations.

Notre objectif est de fournir des solutions et des services rapidement et efficacement, sans compromis, en minimisant le gaspillage et en maximisant la valeur.

Innovation

Notre volonté de progresser nous pousse à rechercher et à adopter en permanence de nouvelles idées, technologies et méthodes.

Cet engagement garantit que nos produits et services évoluent et s'améliorent continuellement.

Fiabilité

Nous tenons notre parole et fournissons à chaque fois des solutions solides et fiables.

Notre objectif est de forger des relations durables basées sur la confiance et le respect mutuel en respectant constamment nos engagements.

Armoires de séchage pour instruments chirurgicaux et d'anesthésie

Les Armoires de séchage Steelco sont autonomes et garantissent un séchage sûr et rapide des instruments grâce à une construction AISI 304 de haute qualité.

Le séchage séparé augmente considérablement la capacité des produits nettoyés et désinfectés. La conception du passage à double porte minimise la contamination croisée et garantit un contrôle supérieur des infections.



ID 300

Capacité : plateaux sur huit étagères
porte(s) simple(s) ou double(s)



AD 400

Capacité : 8 plateaux DIN 1/1 et jusqu'à 36 tuyaux d'anesthésie ou 18 poches d'anesthésie
porte(s) simple(s) ou double(s)



Flexibilité d'installation

Les portes verrouillables peuvent être inversées et configurées pour s'ouvrir à droite ou à gauche.

Capacité et dimensions

Modèle	Chambre utile (LxPxH) - mm			Encombrement (LxPxH) - mm		
AD 400, ID 300	548	714*	1400	710	788**	1908

* Configuration avec passage de porte double de 752 mm, ** Configuration avec passage de porte double de 840 mm

Environnement de séchage contrôlé

Le flux d'air filtré HEPA 14 maintient les articles dans un environnement contrôlé, tandis que le traitement indirect à la lumière UV réduit la charge microbienne pour une hygiène supérieure.


Lorsque la porte s'ouvre, la pression positive bloque l'air extérieur, préservant ainsi l'environnement contrôlé du caisson. Le panneau de commande à LED permet de configurer et de contrôler facilement le processus.



Flexibilité de la configuration


ID 300 :

- Connexion rapide à l'air comprimé à chaque niveau pour le séchage des instruments canulés
- La température à l'intérieur de la chambre peut être réglée de la température ambiante à 80° C.

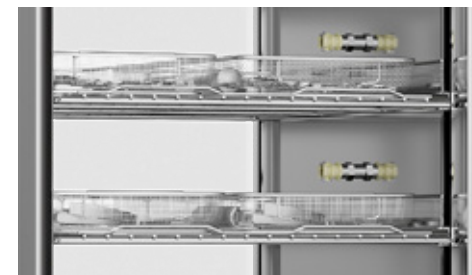

AD 400 :

- Capacité de 8 niveaux, avec étagères grillagées.
- La température à l'intérieur de la chambre est réglée à 40° C.
- Des supports dédiés permettent un séchage rapide des sacs respiratoires

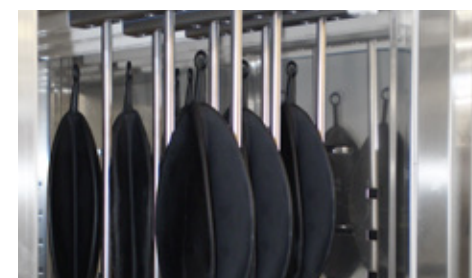

SteelcoBelimed

Miele

Group Member

Innovate with confidence

DC-PD-03-Armoires de séchage ID AD FR Rev.00

Les produits proposés à la vente peuvent différer de ceux décrits ou illustrés dans cette brochure en raison de modifications ultérieures de la production et/ou de configurations optionnelles.

Les produits et les spécifications techniques peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez contacter votre revendeur Steelco pour obtenir les informations les plus récentes.

Steelco S.p.A.
Via Balegante, 27 - 31039 Riese Pio
X (TV) - Italie



steelcobelimed.com