

Armadi di asciugatura per strumenti chirurgici e di anestesia



Steelco

Miele Group Member

Produttore e fornitore globale di soluzioni per il lavaggio e la sterilizzazione

Nata da Steelco e Belimed, SteelcoBelimed produce soluzioni per flussi di lavoro sterili caratterizzate da innovazione, affidabilità e attenzione al cliente. "Innovate with confidence" definisce il nostro impegno verso prodotti e servizi di alta qualità, definendo nuovi standard di settore nel controllo delle infezioni e nelle scienze della vita.

Il cliente al centro

Il nostro impegno per soddisfare le esigenze dei clienti è prioritario.

I nostri prodotti e servizi sono progettati per soddisfare tali esigenze specifiche, garantendo che ogni decisione presa vada a vantaggio dei nostri clienti per ottenere i migliori risultati.

Efficienza

Ci impegniamo a raggiungere la massima produttività ottimizzando processi e risorse.

Il nostro obiettivo è fornire soluzioni e servizi in modo rapido ed efficace, senza compromessi, riducendo al minimo gli sprechi e massimizzando il valore per i nostri clienti.

Innovazione

La nostra dedizione al progresso ci spinge a cercare e abbracciare costantemente nuove idee, tecnologie e metodi.

Questo impegno garantisce che i nostri prodotti e servizi evolvano e migliorino continuamente.

Affidabilità

Manteniamo la nostra parola, offrendo ogni volta soluzioni solide e affidabili.

Il nostro obiettivo è creare relazioni durature basate sulla fiducia e sul rispetto reciproco, rispettando costantemente i nostri impegni.

Armadi di asciugatura per strumenti chirurgici e di anestesia

Gli armadi di asciugatura Steelco sono unità autonome progettate per garantire un'asciugatura sicura e rapida degli strumenti, grazie a una costruzione di elevata qualità in acciaio inox AISI 304.

L'asciugatura separata aumenta significativamente la capacità complessiva di trattamento degli strumenti lavati e disinfettati. Il design a doppia porta passante riduce al minimo la contaminazione crociata e garantisce un controllo superiore delle infezioni.



ID 300

Capacità: vassoi su otto ripiani
porta singola o doppia



AD 400

Capacità: 8 vassoi DIN 1/1 e fino a 36 tubi per anestesia o 18 palloni per anestesia
porta singola o doppia



Flessibilità di installazione

Le porte con serratura possono essere invertite e configurate per aprirsi a destra o a sinistra.

Capacità e dimensioni

Modello	Camera utile (LxPxH) - mm			Ingombro (LxPxH) - mm		
	548	714*	1400	710	788**	1908
AD 400, ID 300						

* Configurazione a doppia porta passante da 752 mm, ** Configurazione a doppia porta passante da 840 mm

Ambiente di asciugatura controllato

Il flusso d'aria filtrato HEPA 14 mantiene gli articoli in un ambiente controllato, mentre il trattamento indiretto con luce UV riduce la carica microbica per un'igiene superiore.


Quando la porta si apre, la pressione positiva blocca l'aria esterna, preservando l'ambiente controllato dell'armadio. Il pannello di controllo a LED consente di impostare e monitorare facilmente il processo.



Flessibilità di configurazione


ID 300:

- Connessione rapida all'aria compressa su ogni livello per l'asciugatura degli strumenti cavi
- La temperatura all'interno della camera può essere regolata da ambiente a 80° C.

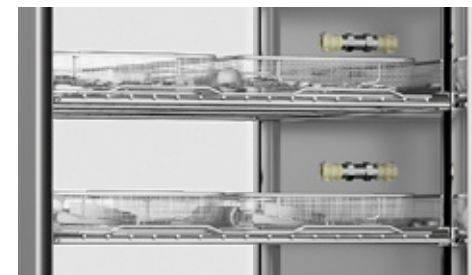

AD 400:

- Capacità di 8 livelli, con ripiani in rete.
- La temperatura all'interno della camera è impostata a 40° C.
- I supporti dedicati consentono una rapida asciugatura dei palloni di anestesia

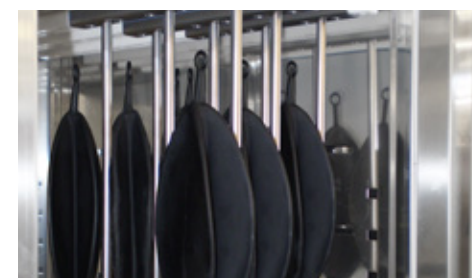

SteelcoBelimed

Miele

Group Member

Innovate with confidence

DC-PD-03-Drying cabinets ID AD IT Rev.00

I prodotti in vendita possono differire da quelli descritti o illustrati in questo opuscolo a causa di modifiche successive alla produzione e/o di configurazioni opzionali.

I prodotti e le specifiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso. Per informazioni aggiornate, contattare il proprio rivenditore Steelco.

Steelco S.p.A.
Via Balegante, 27 - 31039 Riese Pio
X (TV) - Italia



steelcobelimed.com