

Desinfectacuas para hospitales y residencias



Steelco

Miele Group Member

Fabricante y proveedor mundial de soluciones de limpieza y esterilización

Nacida de Steelco y Belimed, SteelcoBelimed es pionera en soluciones de flujo de trabajo estéril con innovación, fiabilidad y orientación al cliente. "Innovar con confianza" define nuestro compromiso con los productos y servicios de alta calidad, estableciendo nuevos estándares industriales en el Control de Infecciones y las Ciencias de la Vida.

Centrados en el cliente

Nuestro compromiso es comprender plenamente las necesidades y la satisfacción de los clientes. Nuestros productos y servicios están diseñados para satisfacer esas necesidades específicas, garantizando que cada decisión que tomamos beneficia a nuestros clientes para obtener los mejores resultados.

Innovación

Nuestra dedicación al progreso nos impulsa a buscar y adoptar constantemente nuevas ideas, tecnologías y métodos. Este compromiso garantiza que nuestros productos y servicios evolucionen y mejoren continuamente.

Sostenibilidad



Nuestro planeta, nuestra responsabilidad. En SteelcoBelimed, la sostenibilidad está integrada en todo lo que hacemos: desde la optimización de los procesos de producción y la reducción del consumo de energía hasta la creación de productos que apoyen el cuidado del medio ambiente. Para nosotros, proteger el futuro significa actuar hoy. Con integridad, determinación y un profundo respeto por las personas y el planeta.

Fiabilidad

Nuestro compromiso es alcanzar los más altos niveles de productividad mediante la optimización de procesos, recursos y operaciones. Al ofrecer sistemáticamente soluciones fiables, garantizamos la creación de valor al tiempo que minimizamos las ineficiencias. Nuestro objetivo es establecer relaciones duraderas basadas en la confianza, la integridad y el respeto mutuo mediante el cumplimiento fiable de nuestros compromisos.

Desinfectacúñas para hospitales y residencias

Tanto si está renovando una instalación existente como diseñando una nueva dedicada, le ofrecemos soluciones eficientes y completas para responder cuidadosamente a sus necesidades. Un sinfín de posibilidades de configuración proporcionan la mejor opción de tratamiento para limpiar y desinfectar pequeños instrumentos generales, bandejas y receptáculos. Nuestra amplia gama de modelos de desinfectacúñas puede integrarse en zonas de lavado específicas.



BP 100

Independiente o bajo
mostrador

BP 100 HSER

Instalación independiente o
mural con WC

BP 100 HE

Instalación independiente o
mural con WC

BP 100 H

Independiente

BP 100 HXL

Independiente

BP 100 HLA

Independiente

Ventajas clave

una combinación ganadora



Nuestra serie de desinfectacúñas ofrece una amplia selección de dispositivos cuidadosamente pensados y adaptados a los requisitos más diversos del sector. Garantiza unos niveles de higiene y limpieza inigualables gracias a la tecnología más avanzada, la eficacia de secado HEPA 14 y la desinfección térmica de todos los artículos reutilizables, como cuñas, botellas de orina y cubos.

Amplia variedad de soportes

Nuestra serie de lavacuñas está equipada con un soporte universal que permite el tratamiento simultáneo de botellas de orina, cuñas, botellas de aspiración y cubos. Diferentes soportes y accesorios están disponibles para satisfacer necesidades específicas.

Lavado a alta presión

La introducción de esta tecnología permite reducir el consumo de agua, productos químicos y tiempo de ciclo. Se ha conseguido un rendimiento de lavado excepcional rediseñando el circuito de lavado y combinando boquillas fijas y rotativas.

Eficiencia de lavado

Las boquillas fijas y giratorias proporcionan una distribución óptima del agua en el interior y el exterior de los artículos tratados para una eficacia de lavado óptima.

El vapor se transporta a través de las boquillas de lavado para garantizar la desinfección completa del circuito de lavado durante cada proceso.

Sistema de secado doble

El sistema de ventilador de secado/refrigeración con filtro HEPA 14 de alta eficacia proporciona un secado uniforme y rápido, garantizando que todos los recipientes se sequen y enfrien rápidamente.

Proceso manos libres por infrarrojos

Todas nuestras lavadoras desinfectadoras de cuñas pueden equiparse con automatismos para garantizar la seguridad higiénica del personal de enfermería.

La apertura y el cierre de la puerta pueden controlarse mediante pedales o mediante un sensor de infrarrojos que evita totalmente el contacto físico operador-máquina.

Los productos sucios se cargan a una altura de trabajo ergonómica.

Soluciones de optimización de la disposición

La capacidad depende del tamaño y las formas de los artículos que deben tratarse.

Los depósitos de productos químicos pueden almacenarse dentro del armario con cerradura situado en el sótano de la máquina.

En las versiones montadas en la pared, el almacén de productos químicos con cerradura se coloca en la parte superior de la máquina.

Los modelos bajo encimera pueden equiparse con armarios laterales específicos.



Sostenibilidad y rendimiento

La unión hace la fuerza

Boquillas fijas y giratorias

Resultados de limpieza probados y eficaces gracias a las numerosas boquillas fijas y giratorias que proporcionan una distribución óptima del agua dentro y fuera de los elementos tratados. Exterior e interior del armario fabricados en acero inoxidable AISI 304. Para eliminar el riesgo de acumulación de suciedad y proliferación de bacterias, la parte interna de la cámara está fabricada con esquinas redondeadas y el lado interior de la puerta con bordes lisos.

El vapor se distribuye en el interior de la cámara a través de los circuitos y boquillas de lavado para asegurar en cada ciclo una perfecta desinfección de los artículos tratados, de la cámara y de los circuitos hidráulicos.

La seguridad ante todo

La desinfección térmica es el método recomendado y más eficaz para la desinfección de todos los artículos reutilizables, como cuñas, botellas de orina, botellas de succión y cubos. Los desinfectacúñas son una ayuda fundamental para el control de las infecciones hospitalarias y pueden mejorar significativamente las condiciones de trabajo del personal

De acuerdo con la norma EN ISO 15883, los desinfectacúñas de Steelco son eficaces en la desinfección contra esporas de *Clostridium Difficile* y cumplen los requisitos de las normas EN 15883-1 y -3.

Según el estudio de expertos de un instituto de higiene independiente, los microorganismos (en particular las esporas de *Clostridium Difficile*) se eliminan de los equipos hospitalarios de forma especialmente eficaz con las máquinas de lavado y desinfección Steelco.



Lavado a alta presión

El mejor consumo de su clase: volumen de agua ajustado al ciclo de lavado.

- Limpieza eficaz con bajo volumen de agua.
- Proceso superrápido: tiempo de ciclo ajustado al programa de lavado.
- Circuito de lavado optimizado.

La introducción de esta tecnología permite reducir el consumo de agua, productos químicos y tiempo de ciclo. Se ha conseguido un rendimiento de lavado excepcional rediseñando el circuito de lavado y combinando boquillas fijas y rotativas.

Flujo de trabajo perfecto

Steelco ha creado una gama completa de sistemas y accesorios dedicados al control de infecciones en centros de atención a personas mayores. Dispositivos fiables, fáciles de usar y eficaces para llevar la limpieza y la higiene a los niveles más altos.

El flujo de trabajo perfecto basado en sus necesidades y la mejor protección del personal y los pacientes puede lograrse con la ayuda de nuestros equipos especializados, que le ayudarán a diseñar y equipar el departamento de esterilización de su sala u hospital de día con las soluciones a medida de Steelco.

Productos químicos para lavacuñas

ProCare Med 10 BPD - Desincrustante para lavacuñas Un desincrustante que evita la formación de cal en los elementos calefactores y en el interior de la cámara. Su uso regular reduce los costes energéticos, prolonga la vida útil de la máquina y minimiza la decoloración de las cuñas de plástico y los frascos de orina. **ProCare Med 10 BPA** - Detergente para lavacuñas Detergente alcalino para la limpieza eficaz de cuñas y botellas de orina en lavacuñas.



BP 100 M/A

Lavadoras desinfectadoras de cuñas bajo mostrador o independiente

La serie BP 100 de lavacuñas es una ayuda multifuncional capaz de alojar todos los recipientes utilizados habitualmente en los hospitales, como cuñas, orinales y botellas de succión. Diferentes soportes y accesorios están disponibles para satisfacer necesidades específicas.



Tratamiento simultáneo de 2 botellas de orina y 1 orinal con tapa o hasta 4 botellas de orina.



Los modelos BP 100 están disponibles en versión independiente o en modelo bajo encimera, con diferentes opciones de personalización, con apertura y cierre de puerta manual o automático.



BP 100 HSER

Lavadora desinfectadora de cuñas de pie o de pared



Tratamiento simultáneo de 1 botella de orina y 1 orinal con tapa o hasta 2 botellas de orina.



Los lavacuñas de la serie BP 100 HSER pueden montarse en la pared. Esta solución que ahorra espacio reduce al mínimo el transporte entre el lugar de contaminación y el de desinfección, minimizando así el riesgo de infección.



Puerta totalmente automática

La automatización contribuye en gran medida a garantizar la seguridad del operario. La apertura y el cierre de la puerta pueden controlarse mediante pedales o mediante un sensor de infrarrojos, evitando así totalmente el contacto físico.

BP 100 HE

Lavadora desinfectadora de cuñas de pie o de pared



Tratamiento simultáneo de 2 botellas de orina y 1 orinal con tapa o hasta 3 botellas de orina.



La serie BP 100 HE de lavacuñas es un auxiliar multifuncional capaz de alojar todos los recipientes utilizados habitualmente en los hospitales, como cuñas, orinales y botellas de succión.

El sistema de ventilador de secado/enfriamiento con filtro HEPA 14 de alta eficacia proporciona un secado uniforme y rápido, garantizando que todos los receptáculos se sequen y enfríen rápidamente.



Los lavacuñas de la serie BP 100 HE pueden montarse en la pared. Esta solución que ahorra espacio reduce al mínimo el transporte entre el lugar de contaminación y el de desinfección, minimizando así el riesgo de infección.

Materiales de primera calidad

Bastidor de la máquina de acero inoxidable AISI 304 de alta calidad, para una fiabilidad y limpieza duraderas. Las boquillas fijas y giratorias proporcionan agua para una distribución óptima dentro y fuera de los artículos tratados.

BP 100 H

Lavadora desinfectadora de cuñas independiente



Tratamiento simultáneo de 2 botellas de orina y 1 orinal con tapa o hasta 4 botellas de orina.



Una forma higiénica, rápida y sencilla de iniciar el ciclo manos libres para una máxima seguridad. De serie con pantalla LCD



La serie BP 100 H puede personalizarse en tres configuraciones diferentes, con puertas manuales, automáticas o semiautomáticas.

Eficiencia de lavado


El vapor se transporta a través de las boquillas de lavado para garantizar la desinfección completa del circuito de lavado durante cada proceso.

BP 100 HXL

Lavacuñas de gran capacidad



Tratamiento simultáneo de 2 cuñas con tapa con hasta 4 botellas de orina, 1 orinal con tapa o 2 cubos con hasta 4 botellas de orina.

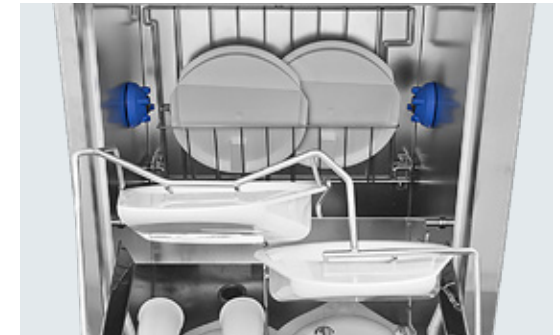

Nuestra serie de lavacuñas está equipada con un soporte universal que permite el tratamiento simultáneo de frascos de orina, cuñas, botellas de succión y cubos. Diferentes soportes y accesorios están disponibles para satisfacer necesidades específicas.



Los depósitos de productos químicos pueden guardarse cómodamente dentro del armario con cerradura en la parte inferior de la máquina

Panel de control fácil de usar

Panel de control suave al tacto de fácil uso con una pantalla gráfica LCD en color equipada con autodiagnóstico. Permite la optimización de todo el proceso mediante la ejecución de programas personalizados.



BP 100 HLA

Lavadoras Desinfectadoras de cuñas con puerta corredera vertical de cristal HST de alta visibilidad



Tratamiento simultáneo de 2 botellas de orina y 1 orinal con tapa u otras combinaciones con botellas de succión o cubos.



Las boquillas fijas y giratorias proporcionan una distribución óptima del agua en el interior y el exterior de los artículos tratados para una eficacia de lavado óptima.



Un interruptor de proximidad por infrarrojos o un pedal permiten al operario abrir y cerrar automáticamente la puerta corredera para ahorrar espacio, evitando el contacto físico del personal.

Puerta corredera de cristal

La BP 100 HLA está equipada con una puerta corredera de cristal HST. El soporte multifunción permite el tratamiento simultáneo combinado de botellas de orina, cuñas, botellas de succión y cubos.



Accesorios y complementos

La unión hace la fuerza

Soportes para recipientes

La lavadora está equipada con un soporte universal. El soporte multifunción permite el tratamiento simultáneo combinado de botellas de orina, cuñas, botellas de succión y cubos.

Existe una amplia gama de soportes según los recipientes más utilizados en los distintos países. Existen diferentes soportes y soportes para necesidades especiales.

Complementos

Los complementos son fundamentales para un flujo de trabajo de desinfección eficaz y fácil de usar. Por este motivo, Steelco ofrece una amplia gama de accesorios, como mostradores con o sin lavabo, vaciadores, estantes murales equipados para el secado y almacenamiento de cuñas y botellas.

ProCare Med 10 BPD

Desincrustante para lavacuñas. El agente complejante (desincrustante) previene la formación de cal, especialmente en los elementos calefactores y la cámara, que si no se trata puede provocar ciclos más largos y un mayor coste de los servicios. El uso de ProCare Med 10 BPD prolonga la vida útil de la máquina y las cargas, ya que puede reducir la decoloración de las cuñas de plástico y las botellas de orina.

ProCare Med 10 BPA

Detergente para lavacuñas. Detergente alcalino que proporciona excelentes resultados de limpieza, utilizado en lavacuñas para la limpieza de cuñas y botellas de orina.



Los vaciadores están disponibles en versión manual o automática.



Rejillas murales para cuñas y botellas de orina



Rejilla extraíble sobre guías. Con este accesorio, la lavadora puede utilizarse también para lavar y desinfectar objetos pequeños

Modelo	Dimensiones totales (AnxPrxAI)		
BP 100 M BP 100 A	600 mm 23 5/8"	600 mm 23 5/8"	850 mm 33 7/16"
BP 100 M9 BP 100 A9	900 mm 37 +7/16"	600 mm 23 5/8"	850 mm 33 7/16"
BP 100 HSER	450 mm 17 3/4"	500 mm 19 11/16"	1320 mm 52"
BP 100 HSER montado en pared	505 mm 19 7/8"	520 mm 20 1/2"	1525 mm 60 1/16"
BP 100 HE BP 100 HSE BP 100 HAE	545 mm 21 7/16"	475 mm 18 11/16"	1630 mm 64 3/16"
BP 100 HE montado en pared	595 mm 23 7/16"	475 mm 18 11/16"	1753 mm 69"
BP 100 H BP 100 HA	450 mm 17 3/4"	500 mm 19 11/16"	1320 mm 52"
BP 100 HXL	602 mm 23 45/64"	560 mm 22 1/2"	1695 mm 66 3/4"
BP 100 HLA	600 mm 23 5/8"	610 mm 24"	1750 mm 68 7/8"



Estante extraíble que se coloca en la parte inferior de la cámara de lavado para facilitar el lavado y la desinfección de cubos y palanganas de gran tamaño



Soporte giratorio especial para facilitar aún más la carga de objetos



Máximo rendimiento con los expertos de SteelcoBelimed

Planes de servicio

Más vale prevenir que curar. Nuestros planes de servicio a medida garantizan el máximo tiempo de actividad de los equipos mediante un mantenimiento preventivo personalizado basado en el uso de la máquina. Tanto si confía en técnicos internos como en nuestro equipo de expertos, las distintas soluciones pueden incluir visitas programadas de mantenimiento preventivo, reparaciones y piezas, en función de las opciones elegidas. Las mejoras opcionales, como la limpieza de la cámara y la supervisión de la calidad del agua, ayudan a optimizar el rendimiento y a controlar los costes, manteniendo sus operaciones en funcionamiento de forma fluida y eficiente. Pregunte a su representante local de SteelcoBelimed por la gama de servicios ofrecidos en su zona.

Academia SteelcoBelimed

La Academia SteelcoBelimed ofrece una amplia gama de opciones de formación adaptadas a las necesidades específicas de los profesionales de la central de esterilización. Las modernas instalaciones de formación de Riese, Italia, dan servicio a las divisiones de SteelcoBelimed Control de Infecciones, Laboratorio e Investigación Biomédica (BMR) con una impresionante capacidad para formar hasta 1.100 técnicos de servicio al año. La Academia representa nuestro compromiso con el avance de todo el campo del procesamiento estéril. Los profesionales sanitarios que se formen aquí obtendrán conocimientos que van más allá del funcionamiento de los equipos para abarcar la ciencia del control de infecciones y la optimización de los flujos de trabajo del procesamiento estéril. Estos conocimientos se traducen directamente en una mejora de la seguridad del paciente y de la eficacia operativa en sus instalaciones.

Contratos de coste total de propiedad (TCO)

Nuestros contratos TCO ofrecen una solución de servicio plurianual y de coste fijo que garantiza la estabilidad presupuestaria y el valor a largo plazo. Al fijar las tarifas y minimizar la exposición al aumento de los costes, estos contratos proporcionan una planificación financiera clara. Ideales para ampliar la vida útil de sus equipos, estos paquetes todo incluido reducen los costes operativos, protegen las inversiones y respaldan los objetivos de sostenibilidad durante todo el ciclo de vida de los equipos.

Digitalización en las operaciones de servicio

Nuestras soluciones digitales proporcionan acceso a los datos de los equipos en tiempo real, ayudando a los equipos de servicio a supervisar el rendimiento e identificar más rápidamente cualquier problema potencial. Los cuadros de mando claros y las alertas automatizadas permiten que el mantenimiento sea más predictivo y eficiente. Estas herramientas mejoran la planificación, reducen los tiempos de inactividad imprevistos y simplifican el cumplimiento de las normativas. Mediante la integración de flujos de trabajo digitales en las rutinas de servicio, las instalaciones pueden mejorar la fiabilidad y tomar decisiones más informadas basadas en el uso real y las tendencias de rendimiento.

SteelcoBelimed  Group Member

Innovate with confidence

DC-PD-02-Steelco Serie BP ES Rev.17.pdf

Los productos ofrecidos a la venta pueden diferir de los descritos o ilustrados en este folleto debido a cambios posteriores en la producción o/y configuraciones opcionales.

Los productos y las especificaciones técnicas están sujetos a cambios sin previo aviso. Póngase en contacto con su distribuidor Steelco para obtener la información más reciente.

Steelco S.p.A.
Via Balegante, 27 - 31039
Riese Pio X (TV) - Italy

steelcobelimed.com

 0051*

*Sólo para productos incluidos en el
909 certificado MDD