

Désinfecteurs de rinceurs

pour les hôpitaux et les maisons de retraite



Steelco

Miele Group Member

Fabricant et fournisseur mondial pour les solutions de nettoyage et de stérilisation

Né de Steelco et Belimed, SteelcoBelimed est un pionnier des solutions de flux de travail stériles alliant innovation, fiabilité et orientation client. "Innover en toute confiance" définit notre engagement à fournir des produits et des services de haute qualité, en établissant de nouvelles normes industrielles dans le domaine du contrôle des infections et des sciences de la vie.

Orientation client

Notre engagement à comprendre pleinement les besoins et la satisfaction de nos clients est une priorité. Nos produits et services sont conçus pour répondre à ces besoins spécifiques, garantissant que chaque décision prise profite à nos clients pour les meilleurs résultats.

Innovation

Notre volonté à innover nous pousse à chercher et à adopter en permanence de nouvelles idées, technologies et méthodes. Cet engagement garantit l'évolution et l'amélioration constantes de nos produits et services.

Durabilité



Notre planète, notre responsabilité. Chez SteelcoBelimed, le développement durable est au cœur de tout ce que nous faisons : de l'optimisation des processus de production à la réduction de la consommation d'énergie, à la création de produits qui favorisent la protection de l'environnement. Pour nous, protéger l'avenir signifie agir aujourd'hui. Avec intégrité, détermination et un profond respect des personnes et de la planète.

Fiabilité

Notre engagement est d'atteindre les plus hauts niveaux de productivité grâce à l'optimisation des processus, des ressources et des opérations. En proposant systématiquement des solutions fiables, nous assurons la création de valeur tout en minimisant les inefficacités. Notre objectif est d'établir des relations durables fondées sur la confiance, l'intégrité et le respect mutuel en honorant nos engagements de manière fiable.

Désinfecteurs de rinceurs pour les hôpitaux et les maisons de retraite

Que vous rénoviez un établissement existant ou que vous en conceviez un nouveau, nous vous proposons des solutions efficaces et complètes pour répondre à vos besoins. Les possibilités de configuration infinies offrent la meilleure option de traitement pour nettoyer et désinfecter les petits instruments généraux, les plateaux et les récipients. Nos différents modèles de rinceurs-désinfecteurs peuvent être intégrés dans des zones de lavage dédiées.



BP 100

Autonome ou sous le
comptoir

BP 100 HSER

Autoportant ou mural avec
WC

BP 100 HE

Autoportant ou mural avec
WC

BP 100 H

Autoportant

BP 100 HXL

Autoportant

BP 100 HLA

Autoportant

Principaux avantages

une combinaison gagnante



Notre série de désinfecteurs de rinceurs offre une vaste sélection d'appareils soigneusement conçus pour répondre aux exigences les plus diverses du secteur. Elle garantit des normes d'hygiène et de nettoyage inégalées grâce à une technologie de pointe, à l'efficacité du séchage HEPA 14 et à la thermo-désinfection de tous les articles réutilisables tels que les bassins de lit, les bouteilles d'urine et les seaux.

Grande variété de supports

Notre série de laveurs bassin est équipée d'un support universel qui permet de traiter simultanément les urinaux, les bassins, les bouteilles d'aspiration et les seaux. Différents supports sont disponibles pour répondre à des besoins spécifiques.

Lavage à haute pression

L'introduction de cette technologie permet de réduire la consommation d'eau, de produits chimiques et la durée du cycle. Des performances de lavage exceptionnelles ont été obtenues en repensant le circuit de lavage et en combinant des buses fixes et rotatives.

Efficacité du lavage

Des buses fixes et rotatives assurent une distribution optimale de l'eau à l'intérieur et à l'extérieur des articles traités pour une efficacité de lavage optimale.

La vapeur est acheminée à travers les buses de lavage pour assurer la désinfection complète du circuit de lavage au cours de chaque processus.

Double système de séchage

Le système de ventilateur de séchage/refroidissement à haute efficacité avec filtre HEPA 14 assure un séchage uniforme et rapide, garantissant un séchage et un refroidissement rapides de tous les récipients.

Processus mains libres à infrarouge

Tous nos Laveur-désinfecteur de bassins peuvent être équipés d'automatismes pour garantir au personnel soignant une sécurité hygiénique.

L'ouverture et la fermeture des portes peuvent être commandées par des pédales ou par un capteur infrarouge qui évite totalement le contact physique entre l'opérateur et la machine.

Les produits souillés sont chargés à une hauteur de travail ergonomique.

Solutions d'optimisation de l'agencement

La capacité dépend de la taille et de la forme des articles à traiter.

Les réservoirs de produits chimiques peuvent être stockés dans le caisson verrouillable situé au sous-sol de la machine.

Pour les versions murales, l'armoire verrouillable pour les produits chimiques est placée sur la partie supérieure de la machine.

Les modèles sous paillasse peuvent être équipés de caissons latéraux dédiés.



Durabilité et performance

Unis dans un même élan

Buses fixes et rotatives

Des résultats de nettoyage efficaces et testés sont obtenus grâce à de nombreuses buses fixes et rotatives qui assurent une distribution optimale de l'eau à l'intérieur et à l'extérieur des articles traités. Le caisson extérieur et intérieur est fabriqué en acier inoxydable AISI 304. Pour éliminer le risque d'accumulation de saleté et de développement de bactéries, la partie interne de la chambre est fabriquée avec des coins arrondis et le côté intérieur de la porte avec des bords lisses.


La vapeur est distribuée à l'intérieur de la chambre à travers les circuits de lavage et les buses pour assurer à chaque cycle une désinfection parfaite des articles traités, de la chambre et des circuits hydrauliques.

La sécurité avant tout

La thermo-désinfection est la méthode recommandée et la plus efficace pour la désinfection de tous les articles réutilisables tels que les bassins, les bouteilles d'urine, les bouteilles d'aspiration et les seaux. Les désinfecteurs de rinceurs constituent une aide fondamentale dans la lutte contre les infections hospitalières et peuvent améliorer de manière significative les conditions de travail du personnel.

Conformément à la norme EN ISO 15883, les désinfecteurs de rinceurs Steelco sont efficaces dans la désinfection contre les spores de *Clostridium Difficile* et répondent aux exigences des normes EN 15883-1 et -3.

Selon l'expertise d'un institut d'hygiène indépendant, les micro-organismes (en particulier les spores de *Clostridium Difficile*) sont éliminés des équipements hospitaliers de manière particulièrement efficace par les machines de lavage et de désinfection Steelco.

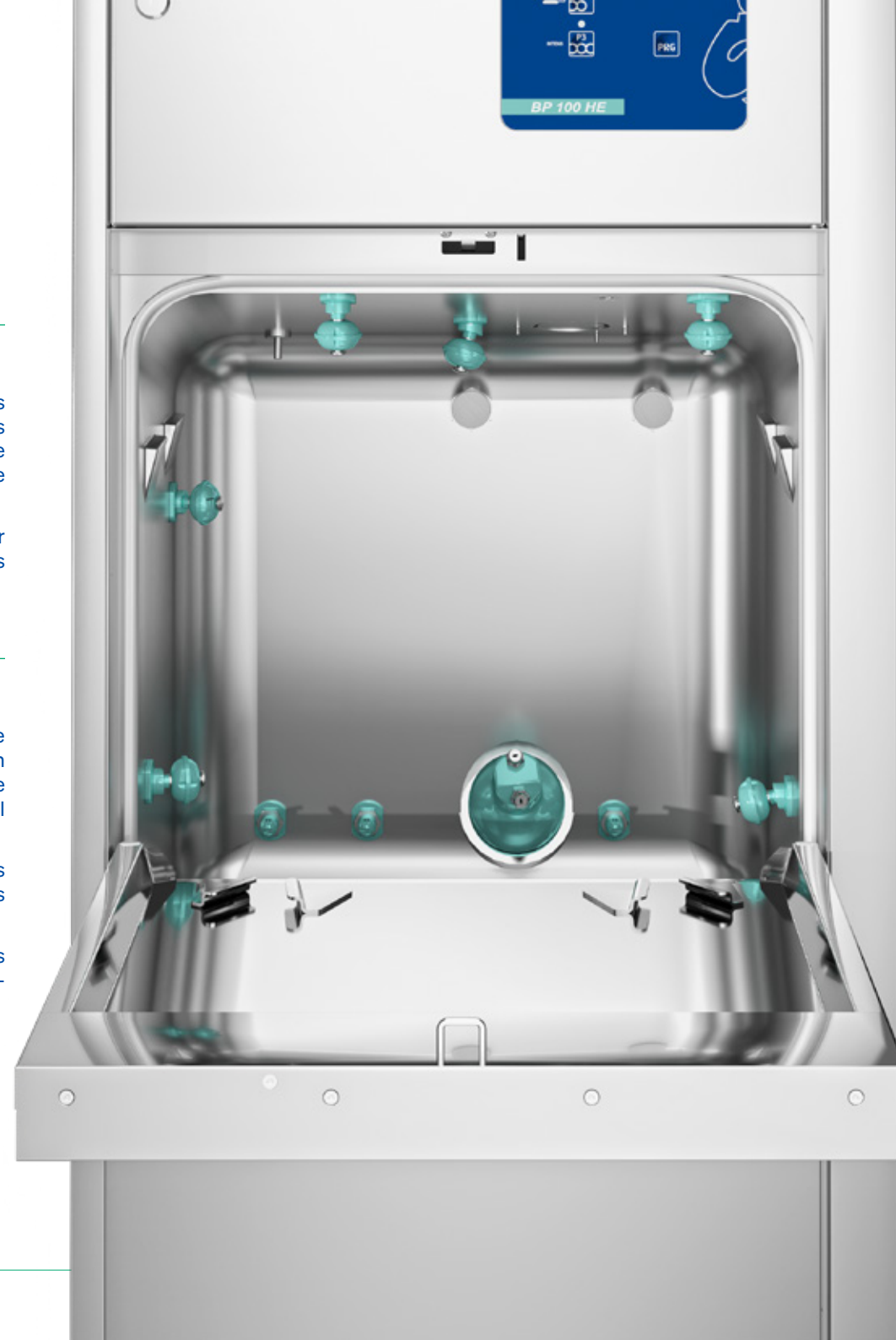

Lavage à haute pression

Meilleure consommation de sa catégorie : volume d'eau adapté au cycle de lavage.

- Nettoyage efficace avec un faible volume d'eau.
- Processus ultra-rapide : durée du cycle adaptée au programme de lavage.
- Circuit de lavage optimisé.

L'introduction de cette technologie permet de réduire la consommation d'eau, de produits chimiques et la durée du cycle. Des performances de lavage exceptionnelles ont été obtenues en repensant le circuit de lavage et en combinant des buses fixes et rotatives.

Un flux de travail parfait

Steelco a créé une gamme complète de systèmes et d'accessoires dédiés au contrôle des infections dans les établissements de soins pour personnes âgées. Des appareils fiables, faciles à utiliser et efficaces qui permettent d'atteindre les normes les plus élevées en matière de propreté et d'hygiène.

Nos équipes spécialisées vous aideront à concevoir et à équiper le service de stérilisation de votre unité de soins ou de votre hôpital de jour avec les solutions sur mesure de Steelco, afin d'obtenir un flux de travail parfait en fonction de vos besoins et d'assurer la meilleure protection possible du personnel et des patients.

Produits chimiques pour laveurs bassin

ProCare Med 10 BPD - Détartrant pour laveurs bassin Un détartrant qui empêche la formation de tartre sur les éléments chauffants et à l'intérieur de la chambre. Son utilisation régulière réduit les coûts énergétiques, prolonge la durée de vie de la machine et minimise la décoloration des bassins en plastique et des bouteilles d'urine. ProCare Med 10 BPA - Détergent pour laveurs bassin Détergent alcalin pour un nettoyage efficace des bassins et des flacons d'urine dans les laveurs bassin.



BP 100 M/A

Laveur-désinfecteur de bassins sous paillasse ou sur pied

Les laveurs bassin de la série BP 100 sont des appareils multifonctionnels capables d'accueillir tous les récipients couramment utilisés dans les hôpitaux, tels que les bassins, les urines et les bouteilles d'aspiration. Différents supports sont disponibles pour répondre à des besoins spécifiques.



Traitement simultané de 2 flacons d'urine et d'un bassin avec couvercle ou jusqu'à 4 flacons d'urine.



Les modèles BP 100 sont disponibles en version autonome ou sous paillasse, avec différentes options de personnalisation, avec une ouverture et une fermeture de porte manuelle ou automatique.



BP 100 HSER

Laveurs-désinfecteurs de bassins à poser ou à fixer au mur



Traitement simultané d'un flacon d'urine et d'un bassin avec couvercle ou de deux flacons d'urine.



Les laveurs bassin de la série BP 100 HSER peuvent être fixés au mur. Cette solution peu encombrante réduit au minimum le transport entre le lieu de contamination et le lieu de désinfection, minimisant ainsi le risque d'infection.



Porte entièrement automatique

L'automatisation contribue grandement à la sécurité de l'opérateur. L'ouverture et la fermeture de la porte peuvent être commandées par des pédales ou par un capteur infrarouge, ce qui évite tout contact physique.

BP 100 HE

Laveur-désinfecteur de bassins à poser ou à installer au mur



Traitement simultané de 2 flacons d'urine et d'un bassin avec couvercle ou jusqu'à 3 flacons d'urine.



Les laveurs bassin de la série BP 100 HE sont des appareils multifonctionnels capables de contenir tous les récipients couramment utilisés dans les hôpitaux, tels que les bassins, les urines et les bouteilles d'aspiration.

Le système de ventilateur de séchage/refroidissement à haute efficacité avec filtre Hepa 14 assure un séchage uniforme et rapide, garantissant un séchage et un refroidissement rapides de tous les récipients.



Les laveurs bassin de la série BP 100 HE peuvent être fixés au mur. Cette solution peu encombrante réduit au minimum le transport entre le lieu de contamination et le lieu de désinfection, minimisant ainsi le risque d'infection.

Matériaux de qualité supérieure

Châssis de la machine en acier inoxydable AISI 304 de haute qualité, pour une fiabilité et une propreté à long terme. Les buses fixes et rotatives assurent une distribution optimale de l'eau à l'intérieur et à l'extérieur des articles traités.

BP 100 H

Laveurs-désinfecteurs de bassins autonomes

Les laveurs bassin de la série BP 100 H sont des appareils multifonctionnels de capacité moyenne, capables de contenir tous les récipients couramment utilisés dans les hôpitaux, tels que les bassins, les urines et les bouteilles d'aspiration.

La vapeur est acheminée à travers les buses de lavage pour assurer la désinfection complète du circuit de lavage au cours de chaque processus.



Traitement simultané de 2 flacons d'urine et d'un bassin avec couvercle ou jusqu'à 4 flacons d'urine.



Un moyen hygiénique, rapide et facile de démarrer le cycle en gardant les mains libres pour une sécurité maximale. Standard avec écran LCD



La série BP 100 H peut être personnalisée en trois configurations différentes, avec des portes manuelles, automatiques ou semi-automatiques.

Efficacité du lavage

La vapeur est acheminée à travers les buses de lavage pour assurer la désinfection complète du circuit de lavage au cours de chaque processus.



BP 100 HXL

Laveur-désinfecteur de bassins de grande capacité



Traitement simultané de 2 bassins avec couvercle et jusqu'à 4 flacons d'urine. 1 pot à selles fermé ou 2 seaux avec jusqu'à 4 flacons d'urine.



Notre série de laveurs de bassins est équipée d'un support universel, permettant le traitement simultané de flacons d'urine, de bassins, de flacons d'aspiration et de seaux. Différents supports sont disponibles pour répondre à des besoins spécifiques.



Les réservoirs de produits chimiques peuvent être commodément stockés dans le caisson verrouillable situé dans le sous-sol de la machine

Panneau de commande convivial

Panneau de commande convivial à touches souples avec écran graphique couleur LCD équipé d'un autodiagnostic. Il permet d'optimiser l'ensemble du processus grâce à l'exécution de programmes personnalisés.

BP 100 HLA

Laveur-désinfecteur de bassins à porte coulissante en verre à haute visibilité



Traitement simultané de 2 flacons d'urine et d'un bassin avec couvercle ou d'autres combinaisons avec des flacons d'aspiration ou des seaux.



Des buses fixes et rotatives assurent une distribution optimale de l'eau à l'intérieur et à l'extérieur des articles traités pour une efficacité de lavage optimale.



Un interrupteur de proximité à infrarouge ou une pédale permet à l'opérateur d'ouvrir et de fermer automatiquement la porte coulissante peu encombrante, évitant ainsi tout contact physique avec le personnel.

Porte en verre coulissante vers le haut

La BP 100 HLA est équipée d'une porte coulissante en verre HST. Le support multifonctions permet de traiter simultanément les bouteilles d'urine, les bassins de lit, les bouteilles d'aspiration et les seaux.



Accessoires et compléments

Unis dans un même élan

Supports d'articles

Le laveur est équipé d'un support universel. Le support multifonctions permet de traiter simultanément les flacons d'urine, les bassins, les bouteilles d'aspiration et les seaux.

Une large gamme de supports est disponible en fonction des récipients les plus couramment utilisés dans les différents pays. Différents supports sont disponibles pour les besoins spécifiques.

Compléments

Les compléments sont primordiaux pour un flux de travail de désinfection efficace et convivial. C'est pourquoi Steelco propose une gamme complète d'accessoires, tels que des comptoirs avec ou sans évier, des videurs, des supports muraux équipés pour le séchage et le stockage des bassins et des urinoirs.

ProCare Med 10 BPD

Détartrant pour laveurs bassin. L'agent complexant (détartrant) empêche la formation de calcaire, en particulier sur les éléments chauffants et la chambre qui, s'ils ne sont pas traités, peuvent entraîner des cycles plus longs et des coûts d'utilisation plus élevés. L'utilisation du ProCare Med 10 BPD prolonge la durée de vie de la machine et des charges, car il peut réduire la décoloration des bassins en plastique et des bouteilles d'urine.

ProCare Med 10 BPA

Détergent pour laveurs bassin. Détergent alcalin offrant d'excellents résultats de nettoyage, utilisé dans les laveurs bassin pour le nettoyage des bassins et des flacons d'urine.

Modèle	Dimension totale (LxPxH)		
BP 100 M BP 100 A	600 mm 23 5/8"	600 mm 23 5/8"	850 mm 33 7/16"
BP 100 M9 BP 100 A9	900 mm 37 +7/16"	600 mm 23 5/8"	850 mm 33 7/16"
BP 100 HSER	450 mm 17 3/4"	500 mm 19 11/16"	1320 mm 52"
BP 100 HSER montage mural	505 mm 19 7/8"	520 mm 20 1/2"	1525 mm 60 1/16"
BP 100 HE BP 100 HSE BP 100 HAE	545 mm 21 7/16"	475 mm 18 11/16"	1630 mm 64 3/16"
BP 100 HE montage mural	595 mm 23 7/16"	475 mm 18 11/16"	1753 mm 69"
BP 100 H BP 100 HA	450 mm 17 3/4"	500 mm 19 11/16"	1320 mm 52"
BP 100 HXL	602 mm 23 45/64"	560 mm 22 1/2"	1695 mm 66 3/4"
BP 100 HLA	600 mm 23 5/8"	610 mm 24"	1750 mm 68 7/8"



Les Vide-bassins sont disponibles en version manuelle ou automatique.



Supports muraux pour bassins et flacons d'urine



Support amovible sur glissières. Avec cet accessoire, le laveur peut également être utilisé pour le lavage et la désinfection de petits objets



Tablette amovible à positionner au fond de la chambre de lavage pour faciliter le lavage et la désinfection des seaux et des bassins de grande taille



Un support rotatif spécial est prévu pour faciliter le chargement des objets



Des performances maximisées avec les experts de SteelcoBelimed

Plans de service

Mieux vaut prévenir que guérir. Nos plans de service sur mesure garantissent une disponibilité maximale de l'équipement grâce à une maintenance préventive personnalisée en fonction de l'utilisation de la machine. Que vous fassiez appel à vos propres techniciens ou à notre équipe d'experts, différentes solutions peuvent inclure des visites préventives programmées, des réparations et des pièces détachées, selon les options choisies. Des services additionnels, tels que le nettoyage de la chambre et la surveillance de la qualité de l'eau, permettent d'optimiser les performances et de maîtriser les coûts, afin que vos opérations se déroulent de manière fluide et efficace.

Renseignez-vous auprès de votre représentant SteelcoBelimed local pour connaître la gamme de services proposés dans votre région.

Académie

L'Académie SteelcoBelimed propose une gamme variée de formations adaptées aux besoins spécifiques des professionnels des services de stérilisation. Le centre de formation de pointe situé à Riese, en Italie, dessert pour SteelcoBelimed les divisions Contrôle des infections, Laboratoire et Recherche biomédicale (BMR), avec une capacité impressionnante de formation pouvant accueillir jusqu'à 1100 techniciens par an. L'Académie incarne notre engagement à faire progresser l'ensemble du domaine du traitement stérile. Les professionnels de santé qui suivent une formation ici acquièrent des connaissances qui vont au-delà du fonctionnement des équipements pour englober la prévention des infections et l'optimisation des processus de stérilisation. Ces connaissances se traduisent directement par une amélioration de la sécurité des patients et de l'efficacité opérationnelle dans leurs établissements.

Contrats TCO

Nos contrats TCO (Total Cost of Ownership) offrent une solution pluriannuelle de service à coût fixe qui garantit la stabilité budgétaire et une valeur à long terme. En fixant les tarifs et en minimisant l'exposition à la hausse des coûts, ces contrats permettent une planification financière claire. Idéaux pour prolonger la durée de vie de votre équipement, ces forfaits tout compris réduisent les coûts d'exploitation, protègent les investissements et soutiennent les objectifs de durabilité tout au long du cycle de vie de l'équipement.

Digitalisation

Nos solutions digitales donnent accès à des données en temps réel sur les équipements, aidant ainsi les équipes de maintenance à surveiller les performances et à identifier plus rapidement tout problème potentiel. Des tableaux de bord clairs et des alertes automatisées permettent une maintenance prédictive et plus efficace. Ces outils favorisent une meilleure planification, réduisent les temps d'arrêt imprévus et simplifient la mise en conformité. En intégrant des flux de travail numériques dans les routines de maintenance, les établissements peuvent améliorer la fiabilité et prendre des décisions plus éclairées basées sur l'utilisation réelle et les tendances de performance.

SteelcoBelimed  Group Member

Innovate with confidence

DC-PD-02-Steelco BP Series FR Rev.17.pdf

Les produits proposés à la vente peuvent différer de ceux décrits ou illustrés dans cette brochure en raison de modifications ultérieures de la production et/ou de configurations optionnelles.

Les produits et les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Veuillez contacter votre revendeur Steelco pour obtenir les informations les plus récentes.

Steelco S.p.A.
Via Balegante, 27 - 31039
Riese Pio X (TV) - Italy

steelcobelimed.com

 0051*

*Uniquement pour les produits listés
dans le 909 certificat MDD