

ProCare Med

Productos químicos para lavadoras desinfectadoras y limpieza manual



Steelco

Miele Group Member

Fabricante y proveedor mundial de soluciones de limpieza y esterilización

Nacida de Steelco y Belimed, SteelcoBelimed es pionera en soluciones de flujo de trabajo estéril con innovación, fiabilidad y orientación al cliente. "Innovar con confianza" define nuestro compromiso con los productos y servicios de alta calidad, estableciendo nuevos estándares industriales en el Control de Infecciones y las Ciencias de la Vida.

Centrados en el cliente

Nuestro compromiso es comprender plenamente las necesidades y la satisfacción de los clientes. Nuestros productos y servicios están diseñados para satisfacer esas necesidades específicas, garantizando que cada decisión que tomamos beneficia a nuestros clientes para obtener los mejores resultados.

Innovación

Nuestra dedicación al progreso nos impulsa a buscar y adoptar constantemente nuevas ideas, tecnologías y métodos. Este compromiso garantiza que nuestros productos y servicios evolucionen y mejoren continuamente.

Sostenibilidad



Nuestro planeta, nuestra responsabilidad. En SteelcoBelimed, la sostenibilidad está integrada en todo lo que hacemos: desde la optimización de los procesos de producción y la reducción del consumo de energía hasta la creación de productos que apoyen el cuidado del medio ambiente. Para nosotros, proteger el futuro significa actuar hoy. Con integridad, determinación y un profundo respeto por las personas y el planeta.

Fiabilidad

Nuestro compromiso es alcanzar los más altos niveles de productividad mediante la optimización de procesos, recursos y operaciones. Al ofrecer sistemáticamente soluciones fiables, garantizamos la creación de valor al tiempo que minimizamos las ineficiencias. Nuestro objetivo es establecer relaciones duraderas basadas en la confianza, la integridad y el respeto mutuo mediante el cumplimiento fiable de nuestros compromisos.

ProCare Med

Productos químicos para lavadoras desinfectadoras y limpieza manual



Tanto si realiza una limpieza manual como si utiliza una unidad ultrasónica o una lavadora desinfectadora, es importante que obtenga los mejores resultados de limpieza y que proteja sus equipos e instrumentos.

Hay muchos factores que pueden afectar a los resultados de la limpieza, como la calidad de los servicios y el equipo, el nivel y el tipo de suciedad presente, así como el uso del ciclo y los productos químicos de proceso adecuados.

Productos químicos para proteger a sus pacientes, equipos y personal

Procare Med es una gama completa de productos químicos cuidadosamente seleccionados y probados para cubrir las necesidades del ciclo completo del proceso de instrumental, incluidos:

- Espuma de pretratamiento manual para su aplicación tras el uso del instrumental
- Transporte de instrumental contaminado
- Limpieza manual previa
- Limpieza ultrasónica
- Detergentes alcalinos suaves, alcalinos y enzimáticos para el procesamiento automatizado en lavadoras desinfectadoras de instrumental y carros
- Neutralizadores orgánicos e inorgánicos que también pueden utilizarse para mantener los instrumentos y las lavadoras desinfectadoras en óptimas condiciones
- Abrillantadores para acortar el tiempo de secado
- Lubricantes para instrumental
- Desincrustante y detergente para desinfectacúñas

Cómo puede ayudarle ProCare Med?

Soluciones integrales para cada fase de su flujo de trabajo de reprocesamiento

Eficacia, compatibilidad y resultados extraordinarios con las soluciones ProCare Med

Steelco entiende que usted dirige un departamento que se enfrenta a muchos retos a diario. Nuestro objetivo es ofrecerle soluciones sencillas pero eficaces que le ayuden a conseguir los mejores resultados de reprocesamiento de forma rentable por ciclo:

- Disponer de una gama completa para satisfacer sus necesidades
- Ofreciendo productos que han sido probados para proporcionar excelentes resultados de limpieza
- Garantizar una compatibilidad óptima de los materiales para prolongar la vida útil de sus instrumentos y equipos
- Proporcionando servicios de consultoría gratuitos para identificar cómo mejorar los resultados de limpieza y resolver los problemas, al tiempo que se optimizan los costes totales y los tiempos de proceso
- Ofrecer un servicio integral para satisfacer las necesidades químicas de sus equipos y procesos

Embalaje

ProCare MED 60 LUB
ProCare MED 40

Aclarado final

ProCare MED 60 LUB
ProCare MED 40

Neutralización

ProCare MED 30 C
ProCare MED 30 P

Desinfectacúñas

Lavado

ProCare MED 10 BPA

Pretratamiento

ProCare MED 13 PRE

Lavado Manual ProCare MED
10 PRE

Limpieza sónica
ProCare MED 10 PRE

Lavado automático
ProCare MED 10 MA
ProCare MED 10 ES
ProCare MED 10 A

Desincrustante
ProCare MED 10 BPD

Productos para el pretratamiento manual

ProCare MED 13 PRE

Espuma para el pretratamiento manual del instrumental

Basado en una formulación especial neutra y enzimática, ProCare Med 13 PRE ofrece las siguientes propiedades:

- Minimiza la adherencia de la suciedad quirúrgica, permitiendo una limpieza más fácil en lavadoras desinfectadoras
- Protege contra la corrosión
- Buena aclarabilidad a temperatura ambiente sin necesidad de aclarado manual dependiendo de las condiciones locales
- Apto para aluminio y aluminio anodizado
- Seguro y sostenible para el usuario
- Se suministra en una botella pulverizadora ergonómica de 500 ml fácil de usar



Cuando hay un retraso entre el uso de los instrumentos y su reprocesamiento, la suciedad se seca en ellos y dificulta su reprocesamiento. Además, puede empezar a formarse corrosión en los instrumentos.

ProCare Med 13 PRE ayuda a superar estos retos.

Envase disponible: 20 x 500 ml

ProCare MED 10 PRE

Detergente ecológico para uso manual

Adecuado para su uso con productos sanitarios termoestables, invasivos y no invasivos, como instrumental quirúrgico, instrumentos de CMI, endoscopios rígidos, equipos de anestesia, etc.

Con una mezcla óptima de tensioactivos, ProCare Med 10 PRE ofrece las siguientes propiedades

- pH neutro con un amplio espectro de compatibilidad de materiales
- Basado en una fórmula sin NTA ni fosfatos
- Altamente biodegradable
- Dosificación baja de 0,2-1% por litro según la aplicación y las condiciones locales



ProCare Med 10 PRE es un detergente suave para la limpieza manual o en remojo de instrumentos para evitar la adherencia de suciedad.

Adecuado también para su uso en lavadoras ultrasónicas.

Capacidad: 5 L



Productos para procesos de limpieza automatizados

ProCare Med 10 MA

Detergente multiusos ligeramente alcalino

Con su formulación única, ProCare Med 10 MA elimina eficazmente una amplia gama de impurezas orgánicas como sangre, residuos de tejidos, mucosidad del instrumental médico y tiene las siguientes propiedades:

- Excelente compatibilidad de materiales sin incompatibilidades conocidas
- Baja formación de espuma
- Puede utilizarse con o sin neutralización
- Sin EDTA ni NTA, sin fragancias ni colorantes
- Biodegradable
- Dosificación baja, normalmente de 1 a 6 ml/L con 5 minutos de lavado dependiendo de las condiciones locales



Detergente respetuoso con los materiales para lavadoras desinfectadoras a base de enzimas y tensioactivos avanzados para el procesamiento automatizado de productos sanitarios invasivos y no invasivos reutilizables, como instrumentos quirúrgicos y de CMI, endoscopios rígidos, equipos anestésicos y respiratorios, utensilios de sala, contenedores de esterilización de aluminio.

Capacidad: 5 L, 10 L, 25L, 200L

ProCare Med 10 EN

Detergente enzimático para procesos automatizados

Con su potente formulación enzimática, ProCare Med 10 EN elimina eficazmente una amplia gama de impurezas orgánicas como sangre, residuos de tejidos, mucosidad del instrumental médico y tiene las siguientes propiedades:

- Excelente compatibilidad de materiales sin incompatibilidades conocidas
- Excelente rendimiento de limpieza
- Baja formación de espuma
- Compatible con aguas duras
- No requiere neutralización
- Sin EDTA ni NTA
- Sin colorantes ni aromas
- Altamente biodegradable
- Dosificado de 2 a 10 ml/L (agua dura) según las condiciones locales



Detergente enzimático con tensioactivos respetuoso con el material para lavadoras desinfectadoras para el tratamiento automatizado de productos sanitarios invasivos y no invasivos reutilizables, como instrumentos quirúrgicos y de CMI, endoscopios rígidos, equipos anestésicos y respiratorios, utensilios de sala, contenedores de esterilización de aluminio.

Capacidad: 5 L, 200L





ProCare Med 10 A

Detergente alcalino multiuso para procesos automatizados

- Elimina suave pero eficazmente sangre, residuos de tejidos, proteínas
- Excelentes propiedades de eliminación y dispersión de contaminantes
- Excelente compatibilidad con una amplia gama de materiales, como acero inoxidable, materiales plásticos, elastómeros, caucho, látex, cerámica y vidrio No apto para aluminio anodizado ni titanio
- No contiene tensioactivos ni álcalis cáusticos
- Dependiendo de las condiciones locales del agua se dosifica entre 3 y 10 ml/L
- ProCare Med 10 A va seguido de un paso intermedio de aclarado de neutralización utilizando el neutralizador inorgánico ProCare Med 30 P

Detergente alcalino para lavadoras desinfectadoras para el procesamiento automatizado de dispositivos médicos reutilizables termoestables, invasivos y no invasivos, como instrumentos quirúrgicos y de CMI, equipos anestésicos, respiratorios y otros equipos médicos.



Capacidad: 5 L, 200 L

ProCare Med 30 C

Agente neutralizante a base de ácido orgánico

- Elimina suavemente los residuos alcalinos de los artículos procesados
- Puede prolongar la vida útil del instrumental al evitar las manchas en los artículos procesados con detergentes alcalinos que podrían dañar los materiales durante la esterilización
- Apto para material de anestesia, acero inoxidable, aluminio (anodizado), materiales plásticos, caucho, vidrio y cerámica
- Sin tensioactivos ni fosfatos
- Controla la deposición de cal en las lavadoras desinfectadoras
- La dosificación de 1 a 3 ml/L proporciona buenos resultados

Neutralizador a base de ácidos orgánicos para lavadoras desinfectadoras después de la limpieza alcalina automatizada de dispositivos médicos invasivos y no invasivos reutilizables, como instrumentos quirúrgicos y de CMI, endoscopios rígidos, equipos anestésicos y respiratorios, utensilios de sala, contenedores de esterilización de aluminio y otros equipos médicos.



Capacidad: 5 L, 200 L

Productos para procesos de limpieza automatizados

ProCare Med 30 P

Agente neutralizante a base de ácido inorgánico

- Elimina eficazmente los residuos alcalinos de los artículos procesados
- Puede prolongar la vida útil de los instrumentos al evitar las manchas en los artículos procesados con detergentes alcalinos que podrían dañar los materiales durante la esterilización
- No contiene tensioactivos
- Apto para acero inoxidable, materiales plásticos, vidrio y cerámica, pero incompatible con aluminio anodizado y zinc
- Controla la deposición de cal en las lavadoras desinfectadoras
- Puede utilizarse para rejuvenecer instrumentos de acero inoxidable propensos a la corrosión
- La dosificación de 1 a 3 ml/L proporciona buenos resultados



Neutralizador a base de ácido inorgánico para lavadoras desinfectadoras después de la limpieza alcalina automatizada de dispositivos médicos invasivos y no invasivos reutilizables, como instrumental quirúrgico.

Capacidad: 5 L, 25 L

ProCare MED 40

Abrillantador biocompatible para procesos automatizados

- Reduce la tensión superficial del agua y acorta significativamente el tiempo de secado
- Reduce las marcas de agua en los productos
- Biocompatibilidad aprobada y no interfiere en el proceso de esterilización
- Compatible con el reciclado del agua de aclarado final para su uso durante la fase de lavado o de aclarado intermedio del siguiente ciclo
- pH neutro con buena compatibilidad de materiales. Apto para acero inoxidable, aluminio (anodizado), metales no ferrosos, PVC, caucho, plástico, materiales, cerámica. Para polisulfona (PSU) y polifenilsulfona (PPSU), PVC, caucho, deben realizarse pruebas de idoneidad antes de su uso
- Dependiendo de la calidad del agua, la dosificación de 0,3 a 1,0 ml/L proporciona buenos resultados



Dosificado en el agua de aclarado final de las lavadoras desinfectadoras, ProCare Med 40 acorta el tiempo de secado de dispositivos médicos reutilizables, invasivos y no invasivos, como instrumental quirúrgico y de CMI, y utensilios. Adecuado para lavadoras desinfectadoras de cámara grande para acortar el tiempo de secado de camas y carros de transporte.

Capacidad: 5 L, 25 L, 200L



Productos para el cuidado del instrumental

ProCare Med 60 LUB

Lubricante para el cuidado del instrumental utilizado en el procesamiento automatizado

- Biocompatible y permite la penetración del vapor durante la esterilización por vapor
- Adecuado para acero inoxidable, creando una fina capa protectora
- No apto para goma, látex ni componentes de circuitos de anestesia o ventilación ni baños de inmersión
- Adecuado para su uso con lavadoras desinfectadoras Steelco. Para otras marcas de equipos, antes de usar compruebe que el sistema de dosificación y otros componentes de las lavadoras desinfectadoras son resistentes al aceite. Comprobar la idoneidad de la junta de la puerta de la lavadora desinfectadora y del esterilizador
- Dosificación típica 0,5-1 ml/L

A base de aceite blanco medicinal y emulsionantes, al mezclarse con agua crea una emulsión homogénea que forma una fina película protectora sobre las superficies de los instrumentos de acero inoxidable, protegiéndolos así de la corrosión por fricción (bisagras y articulaciones). No se resinifica durante la esterilización ni favorece el crecimiento microbiano.



Capacidad: 5 L

Productos para desinfectacúñas

ProCare MED 10 BPD

Desincrustante para lavacúñas

- Agente complejante a base de ácido cítrico
- Evita la formación de cal en la cámara, los elementos calefactores y las cargas
- Puede utilizarse también con agua dura
- Formulación poco espumosa
- Dosificación baja de 0,5 a 1,5 ml /L dependiendo del nivel de dureza del agua

El agente complejante (desincrustante) previene la formación de cal, especialmente en los elementos calefactores y la cámara, que si no se trata puede provocar ciclos más largos y un mayor coste de los servicios. El uso de ProCare Med 10 BPD prolonga la vida útil de la máquina y las cargas, ya que puede reducir la decoloración de las cúñas de plástico y las botellas de orina.



Capacidad: 5 L

ProCare MED 10 BPA

Detergente para desinfectacúñas

- Detergente concentrado alcalino líquido
- Baja formación de espuma
- Elimina la suciedad persistente
- Dosificación baja de 1-3ml/L dependiendo de la dureza del agua
- Adecuado para ciclos de eliminación de Clostridium Difficile
- Adecuado para máquinas equipadas con 2 bombas dosificadoras

Detergente alcalino que proporciona excelentes resultados de limpieza, utilizado en lavacúñas para la limpieza de cúñas y botellas de orina.



Capacidad: 5 L

Sistema centralizado

Para el suministro automático de productos químicos


Para el suministro automático de productos químicos a diferentes lavadoras, unidades ultrasónicas o fregaderos manuales en centrales de esterilización

Para el suministro automático de productos químicos a lavadoras desinfectadoras, unidades ultrasónicas o fregaderos manuales en las centrales de esterilización, este sistema ofrece una solución ideal para reducir la frecuente carga manual de pequeños recipientes en cada lavadora desinfectadora, ahorrando tiempo y costes.

La solución mejora la seguridad del operario y elimina el riesgo de mezclar productos químicos. Está disponible como sistema modular que puede integrarse con supervisión remota y dispositivos de seguridad adicionales.

Principales ventajas del sistema

- Reducción de costes por la compra de garrafas de producto químico.
- Ya no es necesario sustituir los recipientes pequeños.
- Reducción del riesgo de intercambio de productos químicos.
- Supervisión constante de los niveles de producto químico en las garrafas y en los depósitos.

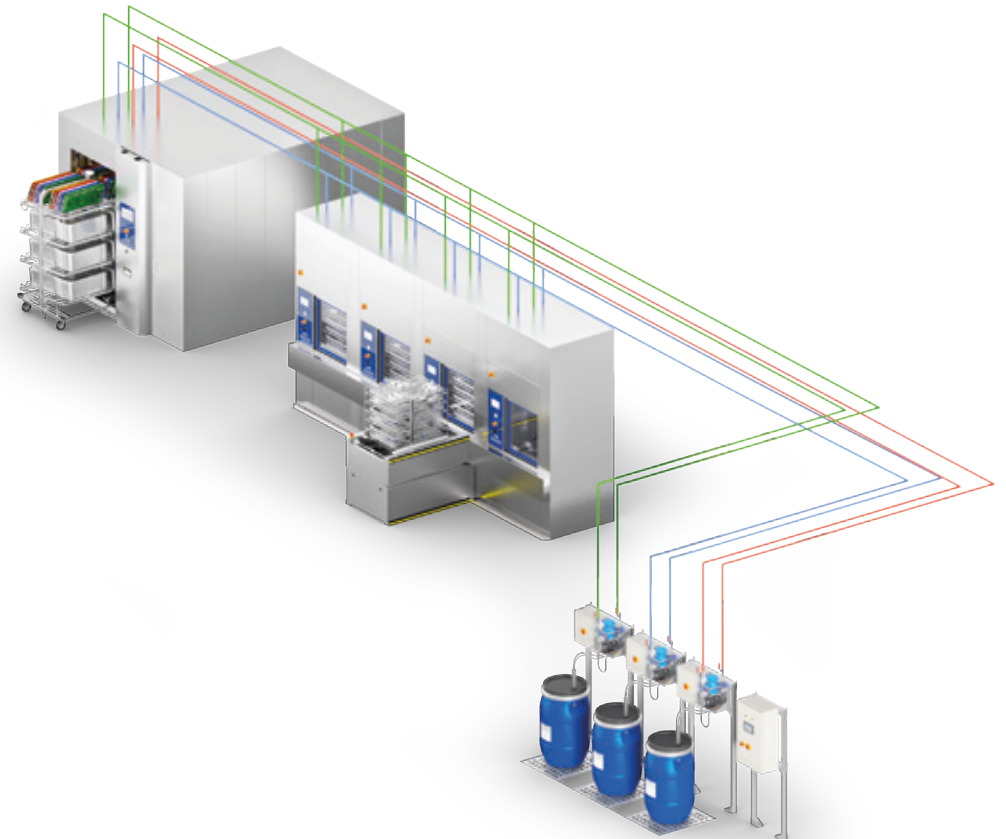

Máximo rendimiento

con los expertos de SteelcoBelimed

Planes de servicio

Más vale prevenir que curar. Nuestros planes de servicio a medida garantizan el máximo tiempo de actividad de los equipos mediante un mantenimiento preventivo personalizado basado en el uso de la máquina. Tanto si confía en técnicos internos como en nuestro equipo de expertos, las distintas soluciones pueden incluir visitas programadas de mantenimiento preventivo, reparaciones y piezas, en función de las opciones elegidas. Las mejoras opcionales, como la limpieza de la cámara y la supervisión de la calidad del agua, ayudan a optimizar el rendimiento y a controlar los costes, manteniendo sus operaciones en funcionamiento de forma fluida y eficiente. Pregunte a su representante local de SteelcoBelimed por la gama de servicios ofrecidos en su zona.

Academia SteelcoBelimed

La Academia SteelcoBelimed ofrece una amplia gama de opciones de formación adaptadas a las necesidades específicas de los profesionales de la central de esterilización. Las modernas instalaciones de formación de Riese, Italia, dan servicio a las divisiones de SteelcoBelimed Control de Infecciones, Laboratorio e Investigación Biomédica (BMR) con una impresionante capacidad para formar hasta 1.100 técnicos de servicio al año. La Academia representa nuestro compromiso con el avance de todo el campo del procesamiento estéril. Los profesionales sanitarios que se formen aquí obtendrán conocimientos que van más allá del funcionamiento de los equipos para abarcar la ciencia del control de infecciones y la optimización de los flujos de trabajo del procesamiento estéril. Estos conocimientos se traducen directamente en una mejora de la seguridad del paciente y de la eficacia operativa en sus instalaciones.

Contratos de coste total de propiedad (TCO)

Nuestros contratos TCO ofrecen una solución de servicio plurianual y de coste fijo que garantiza la estabilidad presupuestaria y el valor a largo plazo. Al fijar las tarifas y minimizar la exposición al aumento de los costes, estos contratos proporcionan una planificación financiera clara. Ideales para ampliar la vida útil de sus equipos, estos paquetes todo incluido reducen los costes operativos, protegen las inversiones y respaldan los objetivos de sostenibilidad durante todo el ciclo de vida de los equipos.

Digitalización en las operaciones de servicio

Nuestras soluciones digitales proporcionan acceso a los datos de los equipos en tiempo real, ayudando a los equipos de servicio a supervisar el rendimiento e identificar más rápidamente cualquier problema potencial. Los cuadros de mando claros y las alertas automatizadas permiten que el mantenimiento sea más predictivo y eficiente. Estas herramientas mejoran la planificación, reducen los tiempos de inactividad imprevistos y simplifican el cumplimiento de las normativas. Mediante la integración de flujos de trabajo digitales en las rutinas de servicio, las instalaciones pueden mejorar la fiabilidad y tomar decisiones más informadas basadas en el uso real y las tendencias de rendimiento.

SteelcoBelimed

Miele

Group Member

Innovate with confidence