

Serie VS

Sterilizzatori a vapore



Steelco

Miele Group Member

Produttore e fornitore globale di soluzioni per il lavaggio e la sterilizzazione

Nata dall'unione di Steelco e Belimed, SteelcoBelimed è pioniera nelle soluzioni per i flussi sterili, con innovazione, affidabilità e attenzione al cliente. "Innovate with confidence" esprime il nostro impegno per prodotti e servizi di alta qualità, stabilendo nuovi standard nel settore del Controllo delle Infezioni e delle Scienze della Vita.

Il cliente al centro

Il nostro impegno è comprendere pienamente le esigenze e la soddisfazione dei clienti. I nostri prodotti e servizi sono progettati per rispondere a queste necessità specifiche, assicurando che ogni decisione che prendiamo porti benefici ai clienti per ottenere i migliori risultati.

Innovazione

La nostra dedizione al progresso ci spinge a cercare e abbracciare costantemente nuove idee, tecnologie e metodi. Questo impegno garantisce che i nostri prodotti e servizi evolvano e migliorino continuamente.

Sostenibilità



Il nostro pianeta, la nostra responsabilità. In SteelcoBelimed, la sostenibilità è parte integrante di tutto ciò che facciamo: dall'ottimizzazione dei processi produttivi e la riduzione dei consumi energetici alla creazione di prodotti che favoriscono la tutela ambientale. Per noi, proteggere il futuro significa agire oggi. Con integrità, determinazione e profondo rispetto per le persone e per il pianeta.

Affidabilità

Il nostro impegno è raggiungere i più alti livelli di produttività attraverso l'ottimizzazione di processi, risorse e operazioni. Fornendo costantemente soluzioni affidabili, garantiamo la creazione di valore riducendo al minimo le inefficienze. Il nostro obiettivo è instaurare relazioni durature basate su fiducia, integrità e rispetto reciproco, adempiendo con affidabilità ai nostri impegni.

Serie VS

Autoclavi per la sterilizzazione a vapore

Abbiamo sviluppato una gamma completa di sterilizzatori a vapore ad alta capacità per soddisfare dalla struttura più piccola al più grande reparto di sterilizzazione. Gli sterilizzatori Steelco offrono: versatilità, sicurezza, alte prestazioni, bassi costi di gestione e tracciabilità. Gli sterilizzatori a vapore della serie VS definiscono un nuovo standard di qualità, ergonomia e sicurezza!



VS 3

Porte scorrevoli verticali. Larghezza 1000 mm.
Volume della camera da 290 lt a 300 lt
Capacità di carico 3 STU



VS 4

Porte scorrevoli verticali. Larghezza 1250 mm.
Volume della camera da 322 lt a 333 lt
Capacità di carico 4 unità



VS 6-8-10-12

Porte scorrevoli verticali. Larghezza 1100 mm.
Volume della camera da 462 lt a 910 lt
Capacità di carico 4 - 6 - 8 - 10 - 12 unità STU



VS H 12-15-18

Configurazione più ampia - Larghezza 1860 mm. Porte scorrevoli orizzontali.
Volume della camera da 905 a 1344 litri.
Capacità di carico 12 - 15 - 18 unità STU

Vantaggi chiave: una combinazione vincente

Qualità del processo

Sebbene la sterilizzazione a vapore sia un processo collaudato, l'innovazione contribuisce a ridurre la manipolazione manuale, a migliorare l'efficienza del ciclo e la sicurezza, riducendo al contempo i tempi del processo e il consumo di energia.

Scoprite di più su ciò che la nostra R&S ha sviluppato insieme alla qualità del processo!

Opzioni ECO avanzate



I nostri sterilizzatori sono dotati di opzioni ECO che consentono di ridurre al massimo il consumo di energia e di acqua, garantendo i più bassi costi operativi per ciclo.

Ulteriori vantaggi in termini di sostenibilità sono ottenuti grazie ai nostri sistemi avanzati di controllo del processo di sterilizzazione e alle soluzioni di tracciabilità digitale.

Opzioni di carico multiple

Steelco offre un'ampia gamma di accessori per migliorare l'efficienza del CSSD, tra cui carrelli di carico, sistemi di impilamento di cesti e contenitori, carrelli di trasferimento ad altezza regolabile, trasportatori e soluzioni passanti. Il sistema "Easy-Load System" per carichi impilabili elimina la necessità di rack di carico e finestre di passaggio, semplificando il flusso di lavoro e risparmiando spazio.

Conformità agli standard

I nostri sterilizzatori sono conformi a:

Direttiva europea per i dispositivi medici:

- 93/42/CEE e relative versioni riviste

Direttiva sulle apparecchiature a pressione:

- PED 2014/68/UE

Norme e standard tecnici:

- EN 285
- EN ISO 14971
- UNI EN ISO 17665-1
- CEI EN 61010-1
- IEC EN 61010-2-040
- EN 62366-1
- CEI EN 61326-1

Velocità di processo ottimizzata

Il nostro obiettivo è fornire ai clienti processi di sterilizzazione il più possibile veloci, in conformità con gli standard internazionali e locali, tenendo sempre conto del carico e del sistema di barriera sterile.

La pompa per vuoto ad anello liquido a due stadi garantisce processi più rapidi e si adatta perfettamente alle dimensioni della camera. Le opzioni della pompa del vuoto e le opzioni ECO contribuiscono a ridurre i tempi di processo.


Soluzioni di ottimizzazione del layout

L'ampia gamma di modelli e la combinazione di sistemi di carico e scarico manuali e automatizzati consentono di ottimizzare le soluzioni di layout. Steelco può fornire servizi di pianificazione architettonica 3D per supportare i responsabili del team CSSD nella personalizzazione delle configurazioni di layout per progetti nuovi o di ristrutturazione.

Gli sterilizzatori Steelco possono essere spediti in sezioni segmentate per superare limitazioni architettoniche come porte strette o ascensori.



Sicurezza e prestazioni Insieme

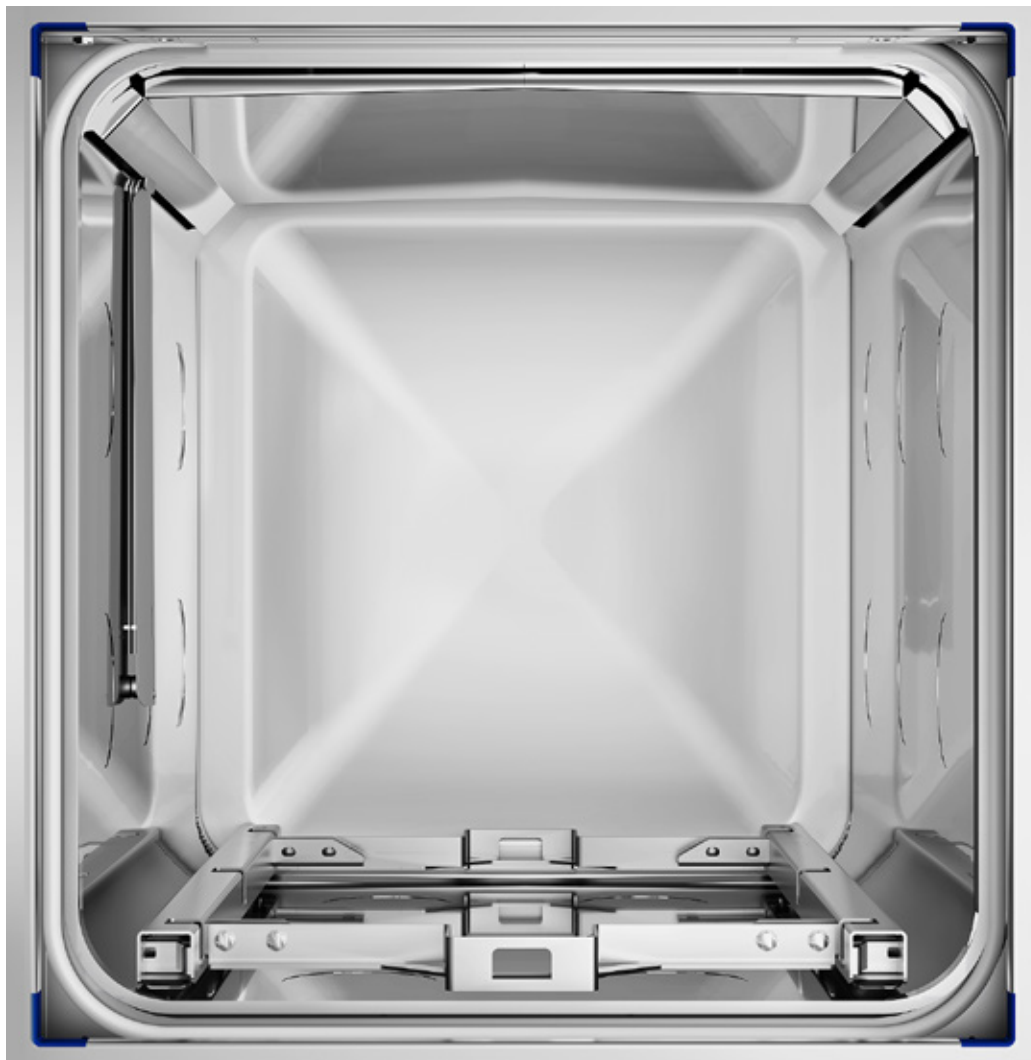

Gli sterilizzatori Steelco VS sono progettati per combinare una struttura robusta con soluzioni tecniche avanzate che garantiscono i più alti standard di sicurezza, efficienza e affidabilità del processo.

Dal design della camera alla generazione del vapore, ogni componente è ottimizzato per garantire prestazioni costanti, tempi di ciclo ridotti e durata a lungo termine.

Velocità di processo ottimizzata

- Il design squadrato della camera riduce lo spazio morto per migliorare il carico e la produttività.
- Le pompe del vuoto si adattano alle dimensioni della camera per cicli più rapidi; sono disponibili nelle versioni a doppio stadio con anello d'acqua o senza acqua.
- L'UPS opzionale mantiene in funzione il sistema di controllo fino a 5 minuti in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica.

Qualità del processo

- L'isolamento premium della camicia e della camera consente un riscaldamento rapido, risparmi energetici e cicli più brevi.
- I componenti in AISI 316L garantiscono affidabilità a lungo termine e vapore pulito.
- L'iniezione diretta di vapore nelle guarnizioni, nella camicia e nella camera migliora la qualità e la sicurezza.
- Il degasaggio integrato riduce i livelli di NCG nell'acqua del vapore.

Opzioni di alimentazione a vapore

Gli sterilizzatori sono disponibili per l'alimentazione diretta di vapore pulito dall'esterno (tipo "V") e con diverse opzioni di generatori di vapore integrati o remoti:

- tipo "E" - a riscaldamento elettrico
- tipo "I" - a riscaldamento indiretto collegato a una fonte di vapore industriale esterna
- tipo "E/V", "I/V" - combinando la fonte di vapore esterna con un generatore di vapore da attivare come soluzione di back up in caso di interruzione della fornitura di vapore


Sostenibile dal punto di vista del design



I nostri dispositivi sono prodotti in Europa, con acciaio e componenti chiave provenienti da fornitori europei di fiducia. Questa politica di approvvigionamento basata sulla prossimità non solo garantisce qualità e affidabilità, ma contribuisce anche a ridurre l'impronta di carbonio complessiva.

Leader nella sicurezza di processo

Sensori NCG e 4D^{IR}

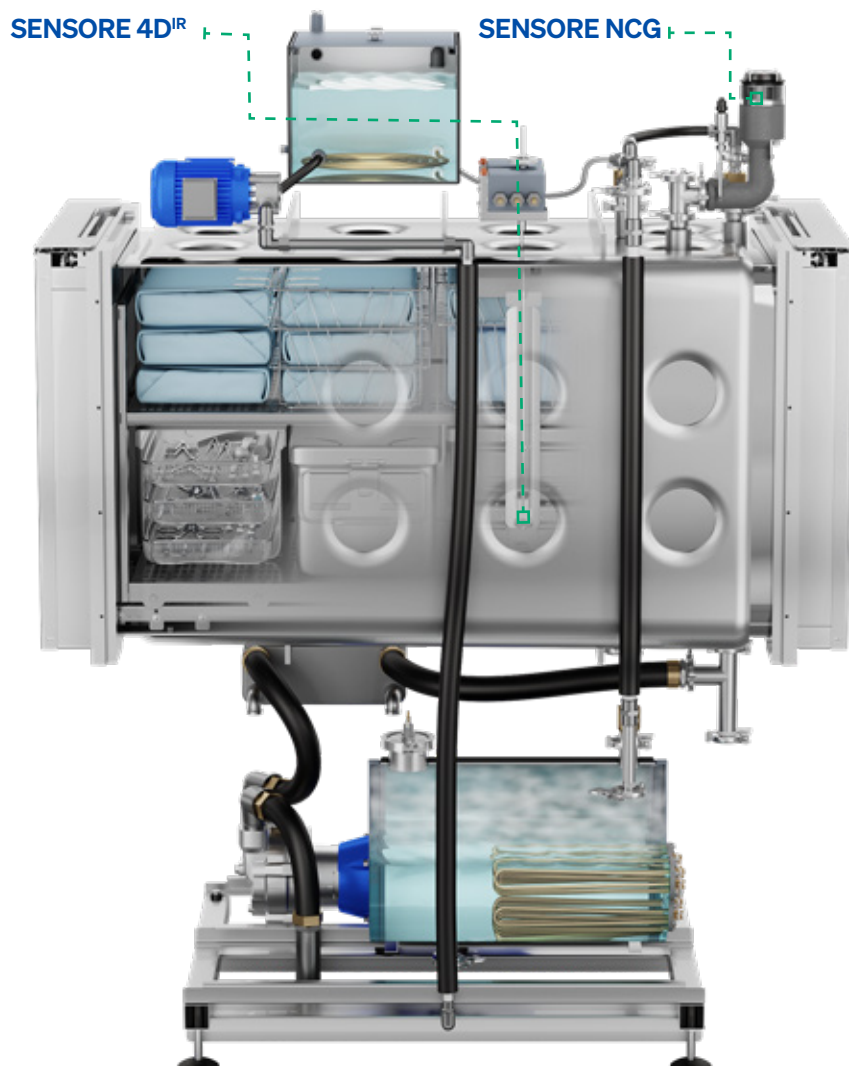

Aumentate la sicurezza dei processi al di là degli standard attuali e migliorate la sostenibilità ambientale con l'opportunità di eliminare la necessità di effettuare test giornalieri di penetrazione del vapore, controlli periodici di rimozione dell'aria e l'uso di routine di indicatori di processo, ottenendo risparmi economici misurabili ora possibili!

SENSORE NCG

Misurare i gas non condensabili (NCG) nella sterilizzazione a vapore non è mai stato così facile. Il sensore monitora la quantità di NCG e la temperatura della camera, verificando automaticamente la quantità di NCG e la qualità del vapore nella camera in conformità alla norma EN285:2015. Ciò consente il rilascio parametrico del carico, basato su valori direttamente misurati e affidabili.

SENSORE 4D^{IR}

Un'innovazione nella sicurezza della sterilizzazione a vapore fin dal test di Bowie & Dick (1963), il sensore 4D è l'unica soluzione commerciale che monitora completamente le condizioni di sterilizzazione in linea con i requisiti EN 285. Misura direttamente la presenza, la densità e la penetrazione del vapore all'estremità chiusa di un tubo metallico di 70 cm che simula il "caso peggiore" di uno strumento cavo confezionato in un sistema di barriera sterile.

Il sensore 4D^{IR} è conforme alle norme ISO 11140-4 e 11140-6

Conformità e risorse

Forniamo una documentazione completa sulla conformità e guide pratiche, tra cui:

- Domande e risposte per una rapida introduzione su come i sensori Steelco migliorano la sicurezza della sterilizzazione
- Letteratura scientifica con approfondimenti e commenti di esperti
- Risorse approfondite su argomenti correlati

Disponibile su richiesta o direttamente dal nostro sito web.



Monitoraggio ecologico del processo di sterilizzazione



I nostri sensori sostituiscono gli indicatori chimici e biologici con una soluzione pulita e sostenibile.

Non è necessario trasportare, immagazzinare o smaltire i materiali degli indicatori, riducendo gli sprechi, la logistica e l'impatto ambientale, e favorendo processi di sterilizzazione più ecologici e responsabili, con la massima garanzia di sterilità possibile.

Efficienza e sostenibilità Insieme


Opzioni ECO avanzate: livelli di efficienza ineguagliabili, riduzione del consumo di energia e di acqua con i più bassi costi operativi per carico. Anche quando gli sterilizzatori sono già efficienti rispetto ai modelli equivalenti della concorrenza, per aiutare i nostri clienti a risparmiare ulteriormente l'acqua, Steelco ha introdotto i pacchetti ECO per il risparmio idrico.

Ogni goccia conta!

Il consumo annuale di acqua in litri di un CSSD di un tipico ospedale universitario con 4 unità di sterilizzatore da 18 STU con vapore domestico (15 cicli al giorno, 6 giorni alla settimana, 52 settimane all'anno) senza sistema di risparmio idrico può raggiungere i 6.458.400 litri.


Questo consumo può essere ridotto a meno di un decimo o a zero con le opzioni ECO!

I risparmi sul consumo d'acqua sono indicati rispetto alle macchine standard, non rispetto alle macchine con le peggiori prestazioni di altre aziende. Solo i dati di consumo effettivi per cicli specifici con e senza pacchetti di risparmio energetico forniscono un confronto realistico.

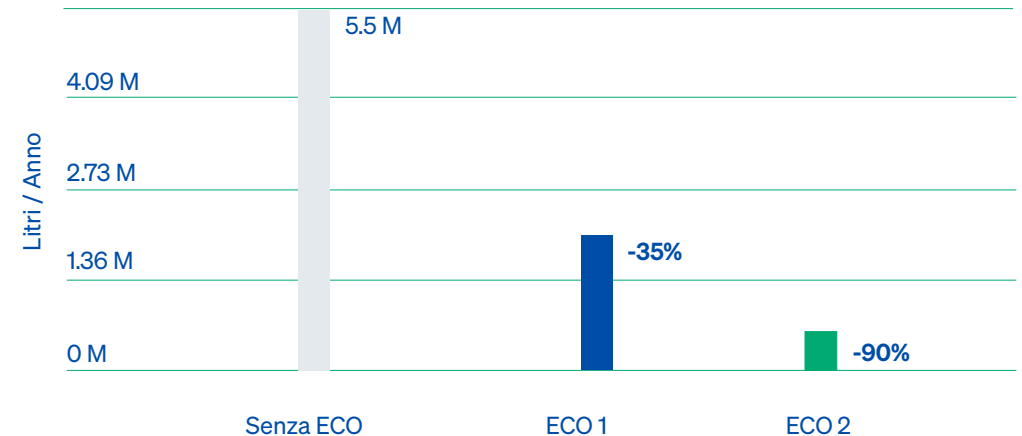

ECO 1

pacchetto standard di risparmio idrico

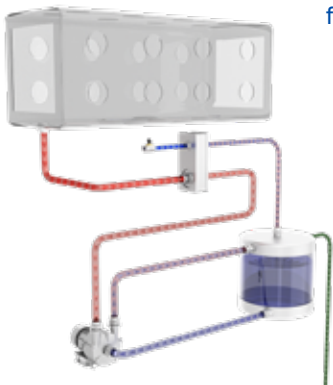

Incluso come standard in tutti i nostri sterilizzatori, ECO 1 riflette il nostro impegno verso la responsabilità ambientale. Questo sistema riduce il consumo di acqua di circa il 35%, utilizzando meno acqua per raffreddare lo scarico: una soluzione di base efficace per un funzionamento sostenibile.

ECO 2

pacchetto avanzato per il risparmio idrico



Progettato per le strutture con accesso a un circuito di acqua refrigerata, ECO 2 consente di ottenere un risparmio idrico superiore al 90% sul funzionamento della pompa del vuoto. Gli scambiatori di calore ad alta efficienza eliminano la necessità di acqua di rubinetto aggiuntiva per raffreddare lo scarico, offrendo un potente upgrade per i reparti ad alta produttività.

Steelco ottimizza i flussi di lavoro per la sterilizzazione con soluzioni ergonomiche e flessibili, studiate su misura per ogni CSSD. La sua gamma completa di accessori, tra cui i carrelli di trasferimento e il sistema Easy Load, aumenta l'efficienza, supporta il carico automatico e aiuta a ridurre lo spazio e i requisiti strutturali.



Caricamento con ripiani estraibili


- Elimina la necessità di rack di carico.
- Ideale per i piccoli reparti di sterilizzazione.
- Dotato di guide laterali per evitare la caduta di materiali sterili.



Ripiani scorrevoli al posto del carrello e della slitta. La scaffalatura fissa con supporti per ripiani perforati è montata su ciascun lato delle pareti della camera dello sterilizzatore. Disponibile solo per le versioni a 4 e 6 STU.

Rastrelliera di carico a griglia per cestelli a norma ISO

- Flessibilità nella regolazione in altezza dei livelli per massimizzare la capacità di carico
- Compatibilità con le scaffalature di stoccaggio a norma ISO
- In caso di utilizzo con sterilizzatori a doppia porta, si raccomanda l'installazione di un portello/finestra di ritorno
- Disponibilità di carrelli di trasferimento regolabili in altezza e ad altezza fissa

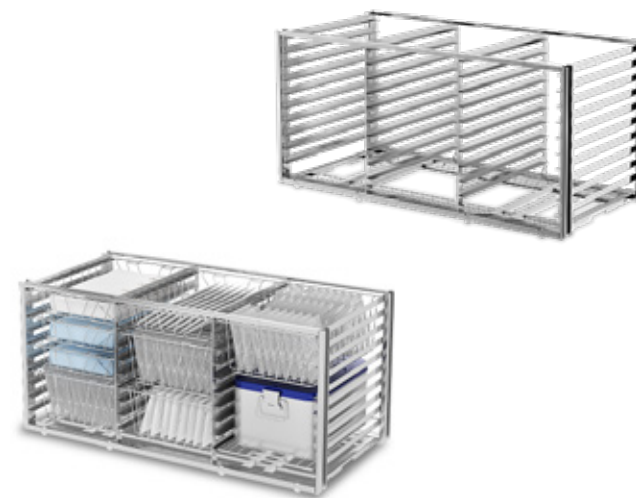

Scaffali di carico dotati di cursori fino a 9 livelli che possono essere utilizzati per i cestini di sterilizzazione e per ripiani in filo metallico per usi generici, disponibili per capacità di 6 e 8 STU.

Caricamento con scaffali di carico

- Adatto a contenitori/cestini di tutte le dimensioni
- Quando si tratta di sterilizzatori a doppia porta, si consiglia di installare un portello/finestra di ritorno
- Disponibilità di carrelli di trasferimento ad altezza fissa, regolabile in altezza e anche regolabile in altezza con sistema di carico e scarico semiautomatico.



Scaffalature di carico con livelli regolabili in altezza.
Carrelli di trasporto fissi o regolabili con capacità da 4 a 12 STU.

Sistema di carico Easy Load

- Per il caricamento di cestini e contenitori impilabili
- Compatibilità con le scaffalature di stoccaggio a norma ISO e DIN
- Risparmio di spazio grazie all'assenza di un portello/finestra di ritorno
- Disponibilità di carrelli di trasferimento regolabili in altezza e ad altezza fissa



Disponibilità da 4 a 12 STU. Gli sterilizzatori possono essere alimentati direttamente dal carrello di trasferimento o con il supporto di sistemi di trasporto automatici di carico e scarico.

Automazioni per il carico e lo scarico

- Adatto per scaffalature e sistema Easy Load
- Disponibile per carico frazionato (cioè 6+6 o 9+9 STU) per ridurre i rischi legati alla movimentazione di carichi pesanti e per ottimizzare l'utilizzo dello spazio nel CSSD
- Trasportatori automatici bidirezionali per il carico e lo scarico delle rastrelliere per applicazioni di sterilizzazione a porta singola e doppia



Gamma completa disponibile per tutti i modelli di sterilizzatori da 4 a 18 STU e per la combinazione con portelli o finestre passanti.

Produttività e automazione

Insieme

Steelco: leader nelle soluzioni personalizzate

Steelco è rinomata per lo sviluppo di soluzioni di automazione che facilitano gli utenti nelle loro attività quotidiane.



ATS

Sistema di
Sistema di trasferimento
automatico

Un'automazione appositamente progettata per i reparti in cui tempo e spazio sono critici. Una navetta si muove lungo gli sterilizzatori e carica automaticamente i rack nel primo sterilizzatore disponibile. L'ATS è disponibile sia per il carico che per lo scarico.

Vantaggi del sistema:

- Riduzione del rischio di infortuni legati al carico e allo scarico manuale di carichi pesanti.
- Selezione automatica del ciclo corretto per il tipo di merce grazie al sistema di codici a barre.
- Il carico di lavoro bilanciato tra gli sterilizzatori migliora l'efficienza e supporta una pianificazione proattiva della manutenzione.
- Consente l'installazione in spazi ristretti, inaccessibili al carico manuale o ostruiti da colonne
- Facile pulizia dell'area sottostante il sistema ATS.

Pianificazione e progettazione la soluzione migliore per ogni esigenza

Grazie alla sua ampia gamma di dispositivi e soluzioni, SteelcoBelimed è in grado di offrire una risposta ottimale alle applicazioni più complesse, combinando in modo appropriato lavatrici, sterilizzatori, mobili e sistemi di automazione. Un portafoglio completo ci permette di fornire soluzioni di trattamento sterile complete e su misura, dalle piccole cliniche ai grandi reparti di trattamento centralizzati.



Il nostro servizio di pianificazione del sistema, basato sulla modellazione architettonica 3D, supporta i clienti nella definizione delle configurazioni ottimali del layout sia per le nuove strutture che per i progetti di ristrutturazione.

Flessibilità e controllo Insieme

L'interfaccia HMI offre immagini luminose e di facile lettura e un controllo agevole, anche a distanza. Progettata per l'efficienza quotidiana, semplifica le operazioni con una navigazione intuitiva e un feedback in tempo reale. Questo design di facile utilizzo, coerente con l'intera gamma dei nostri dispositivi, garantisce flussi di lavoro fluidi e prestazioni affidabili.


Un'interfaccia facile da usare

Gli operatori sono supportati in ogni fase della loro interazione con il dispositivo attraverso comandi chiari e di facile comprensione. I programmi di ciclo possono essere selezionati anche tramite codice a barre o scanner RFID.

Gli ampi display del pannello di controllo touchscreen fino a 10" e "attivi" su entrambi i lati di carico e scarico visualizzano in modo chiaro lo stato del ciclo e i messaggi di allarme, facilitando il controllo del dispositivo con informazioni luminose e di facile lettura.

Modalità di assistenza tecnica

Lo sterilizzatore è stato progettato con pochi componenti per semplificare la manutenzione. Un pannello sinottico di facile lettura consente una panoramica approfondita dello stato dei componenti dello sterilizzatore, accelerando gli interventi di assistenza.

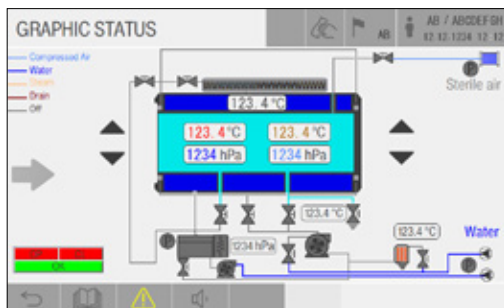

Pannello sinottico di facile lettura


Livelli di accesso per l'utente

L'accesso degli utenti è suddiviso in 5 livelli per garantire che solo il personale addestrato abbia accesso a funzioni specifiche: operatore, responsabile di reparto, tecnico dell'assistenza presso il cliente, tecnico dell'assistenza autorizzato e produttore.

Grazie al design intuitivo dell'HMI, in linea con l'intero portafoglio di dispositivi, le operazioni sono semplici e i processi sicuri.

Memorizzazione dei dati del ciclo

I dati del ciclo sono memorizzati e disponibili dalla stampante integrata opzionale e, se il dispositivo è collegato alla rete, i dati possono essere inviati a un sistema di tracciabilità centralizzato.

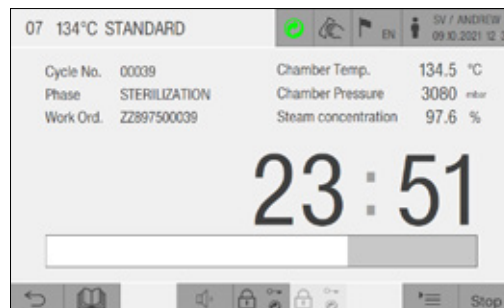

Messaggi di allarme e di stato del ciclo altamente visibili.

Soluzione di digitalizzazione Software di gestione e tracciamento

Garantire la disponibilità di strumenti nel posto giusto al momento giusto, ricondizionati secondo gli standard corretti nel minor tempo possibile e al minor costo possibile.

SmartHub Connect


SmartHub Connect è una soluzione software on-premise che raccoglie i dati dalle apparecchiature compatibili e li invia a un sistema di tracciabilità degli strumenti. Gli utenti ottengono una trasparenza totale grazie a una dashboard visiva che indica lo stato dei programmi e dei cicli per ogni macchina collegata. La dashboard di SmartHub Connect è un potente strumento per una gestione semplificata ed efficiente dei CSSD.

SmartHub Flow

SmartHub Flow è il nostro software basato sul web e pronto per il cloud per la tracciabilità dei set e la localizzazione degli strumenti. Progettato per affrontare le sfide della crescente complessità dei CSSD, il software fornisce uno strumento di monitoraggio preciso e sicuro che consente di ottimizzare progressivamente il flusso di lavoro mantenendo elevati standard di produttività. Le informazioni raccolte sulla produzione, la spedizione e la gestione del magazzino consentono un'accurata analisi e quantificazione dei costi, migliorando l'efficienza economica. Il software è conforme agli standard di sicurezza internazionali come ISO 27001 e ISO 13485.

SmartHub Orbit

SmartHub Orbit è la nostra innovativa applicazione basata sul web che trasforma i dati delle macchine in informazioni utili e valore aggiunto. Tutti i dati delle apparecchiature e gli stati dei cicli sono accessibili da qualsiasi dispositivo, ovunque e in qualsiasi momento. In questo modo i responsabili dei CSSD hanno il pieno controllo e rivoluzionano il loro modo di lavorare. SmartHub è progettato per supportare l'intero team CSSD con funzionalità e aggiornamenti in continua evoluzione, come l'e-learning, la risoluzione dei problemi, la digitalizzazione dei processi e l'analisi avanzata.

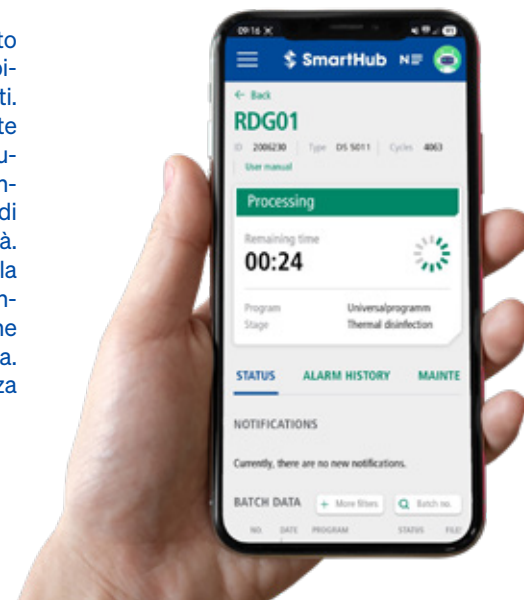

Affidabilità e affidabilità Insieme

Le camere in acciaio inossidabile di alta qualità e le tubazioni isolate assicurano la durata e la pulizia del vapore, mentre l'installazione a zero gap e i componenti accessibili semplificano la manutenzione. Un adeguato trattamento dell'acqua protegge ulteriormente le prestazioni e prolunga la vita del dispositivo.

Materiali di alta qualità, dispositivi destinati a durare nel tempo

La camera di sterilizzazione e le tubazioni del processo di vapore sono realizzate in acciaio inox AISI 316 L di alta qualità, garanzia di affidabilità a lungo termine e pulizia del vapore.

Le camere e le tubazioni in acciaio inox antiacido sono completamente isolate con un isolante termico privo di CFC, facile da rimuovere e da rimontare in caso di necessità di manutenzione. Per facilitare la manutenzione, la maggior parte delle tubazioni è collegata con tri-clamp in acciaio inox e i componenti principali, come la pompa del vuoto, sono installati su guide scorrevoli.

Ingombro e requisiti di servizio ridotti al minimo

Gli sterilizzatori a vapore della serie VS sono progettati per un'installazione laterale "zero gap". La manutenzione è completamente frontale grazie alla porta incernierata che si apre completamente (e dal retro se la versione è a doppia porta) consentendo l'accesso a tutti i componenti.

La manutenzione di questa gamma di dispositivi è snella, altamente semplificata e conveniente.

Il servizio completo dal lato di scarico è opzionale.

Una sterilizzazione a vapore efficace richiede una corretta qualità dell'acqua

Una qualità dell'acqua adeguata aiuta anche a prevenire il deposito di contaminanti come il calcare e prolunga la vita del dispositivo di sterilizzazione. Steelco offre un'ampia gamma di opzioni di trattamento dell'acqua per strutture di diverse dimensioni: addolcitori, sistemi di acqua RO e DI, refrigeratori d'acqua.



Capacità e dimensioni

Layout e configurazioni

Serie VS 3 STU

Modello	Camera (LxAxP) - mm			Litri	Ingombro (LxAxP) - mm		
Porta singola							
VS 3/1	440	700	945	290	1000	1900	1292
Modelli a doppia porta							
VS 3/2	440	700	970	300	1000	1900	1292

Altezza di carico: 900 mm dal pavimento finito.

Serie VS 4 - 6 - 8 - 10 - 12 STU

Modello	Camera (LxAxP) - mm			Litri	Ingombro (LxAxP) - mm		
Porta singola							
VS 4/1	670	700	686	322	1250	1900	992
VS 6/1	670	700	986	462	1100	1900	1292
VS 8/1	670	700	1286	603	1100	1900	1592
VS 10/1	670	700	1586	744	1100	1900	1892
VS 12/1	670	700	1940	910	1100	1900	2222
Modelli a doppia porta							
VS 4/2	670	700	710	333	1250	1900	992
VS 6/2	670	700	1010	474	1100	1900	1292
VS 8/2	670	700	1310	614	1100	1900	1592
VS 10/2	670	700	1610	755	1100	1900	1892
VS 12/2	670	700	1940	910	1100	1900	2222

Altezza di carico: 900 mm dal pavimento finito.

Serie VS H 12 - 15 - 18 STU

Modello	Camera (LxAxP) - mm			Litri	Ingombro (LxAxP) - mm		
Porta singola							
VS 12/1 H	670	1050	1286	905	1860	1900	1592
VS 15/1 H	670	1050	1586	1116	1860	1900	1892
VS 18/1 H	670	1050	1886	1327	1860	1900	2192
Modelli a doppia porta							
VS 12/2 H	670	1050	1310	922	1860	1900	1592
VS 15/2 H	670	1050	1610	1133	1860	1900	1892
VS 18/2 H	670	1050	1910	1344	1860	1900	2192

Altezza di carico: 300 mm dal pavimento finito.

Massimizza le prestazioni grazie agli esperti SteelcoBelimed

Soluzioni di assistenza

Prevenire è meglio che curare. I nostri piani di assistenza personalizzati garantiscono la massima operatività delle apparecchiature attraverso interventi di manutenzione preventiva studiati in base all'utilizzo dei dispositivi. Che si tratti di tecnici interni o del nostro team di esperti, le diverse soluzioni possono includere visite programmate di manutenzione preventiva, riparazioni e ricambi, a seconda delle opzioni scelte. Servizi opzionali, come la pulizia della camera e il monitoraggio della qualità dell'acqua, contribuiscono a ottimizzare le prestazioni e a controllare i costi, mantenendo le vostre operazioni fluide ed efficienti. Contattate il vostro rappresentante SteelcoBelimed per conoscere la gamma di servizi disponibili nella vostra area.

SteelcoBelimed Academy

SteelcoBelimed Academy offre un'ampia gamma di opzioni formative, pensate per rispondere alle esigenze specifiche dei professionisti delle centrali di sterilizzazione (CSSD). La struttura di formazione all'avanguardia di Riese, in Italia, serve le divisioni SteelcoBelimed Infection Control, Laboratory e Biomedical Research (BMR), con l'impressionante capacità di formare fino a 1.100 tecnici di assistenza all'anno. L'Academy rappresenta il nostro impegno a far progredire l'intero settore della sterilizzazione. I professionisti sanitari che si formano qui acquisiranno competenze che vanno oltre il semplice utilizzo delle apparecchiature, includendo la scienza del controllo delle infezioni e l'ottimizzazione dei flussi di lavoro nella sterilizzazione. Queste conoscenze si traducono direttamente in una maggiore sicurezza per i pazienti e in una migliore efficienza operativa nelle loro strutture.

Contratti TCO (Total Cost of Ownership)

I nostri contratti TCO offrono una soluzione di assistenza pluriennale a costo fisso, garantendo stabilità di budget e valore a lungo termine. Bloccando le tariffe e riducendo l'esposizione all'aumento dei costi, questi contratti consentono una pianificazione finanziaria chiara. Ideali per prolungare la vita delle apparecchiature, i pacchetti all-inclusive riducono i costi operativi, proteggono gli investimenti e supportano gli obiettivi di sostenibilità lungo l'intero ciclo di vita delle macchine.

Digitalizzazione nelle Operazioni di Assistenza

Le nostre soluzioni digitali consentono di accedere ai dati delle apparecchiature in tempo reale, aiutando i team di assistenza a monitorare le prestazioni e a identificare più rapidamente eventuali problemi. Dashboard intuitive e avvisi automatici rendono la manutenzione più predittiva ed efficiente. Questi strumenti favoriscono una migliore pianificazione, riducono i fermi imprevisti e semplificano la conformità normativa. Integrando i flussi di lavoro digitali nelle routine di assistenza, le strutture possono migliorare l'affidabilità e prendere decisioni più informate basate sull'effettivo utilizzo e sull'andamento delle performance.

SteelcoBelimed  Group Member

Innovate with confidence

DC-PD-02-Steelco VS Serie G1 IT Rev. 15

I prodotti offerti in vendita possono differire da quelli descritti o illustrati in questa brochure a causa di modifiche successive alla produzione e/o di configurazioni opzionali.

I prodotti e le specifiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso. Per informazioni aggiornate, consultare il proprio rivenditore Steelco.

Steelco S.p.A.
Via Balegante, 27 - 31039
Riese Pio X (TV) - Italy

steelcobelimed.com



*Solo per i prodotti elencati nel
1652 certificato MDD