

Lavastrumenti da sottobanco per ambulatori e cliniche



Steelco

Miele Group Member

Produttore e fornitore globale di soluzioni per il lavaggio e la sterilizzazione

Nata da Steelco e Belimed, SteelcoBelimed produce soluzioni per flussi di lavoro sterili caratterizzate da innovazione, affidabilità e attenzione al cliente. "Innovate with confidence" definisce il nostro impegno verso prodotti e servizi di alta qualità, definendo nuovi standard di settore nel controllo delle infezioni e nelle scienze della vita.

Il cliente al centro

Il nostro impegno per soddisfare le esigenze dei clienti è prioritario.

I nostri prodotti e servizi sono progettati per soddisfare tali esigenze specifiche, garantendo che ogni decisione presa vada a vantaggio dei nostri clienti per ottenere i migliori risultati.

Efficienza

Ci impegniamo a raggiungere la massima produttività ottimizzando processi e risorse.

Il nostro obiettivo è fornire soluzioni e servizi in modo rapido ed efficace, senza compromessi, riducendo al minimo gli sprechi e massimizzando il valore per i nostri clienti.

Innovazione

La nostra dedizione al progresso ci spinge a cercare e abbracciare costantemente nuove idee, tecnologie e metodi.

Questo impegno garantisce che i nostri prodotti e servizi evolvano e migliorino continuamente.

Affidabilità

Manteniamo la nostra parola, offrendo ogni volta soluzioni solide e affidabili.

Il nostro obiettivo è creare relazioni durature basate sulla fiducia e sul rispetto reciproco, rispettando costantemente i nostri impegni.

Lavastrumenti da sottobanco per ambulatori e cliniche

Una gamma completa di lavastrumenti da sottobanco per il riprocesso dei dispositivi medici negli ambulatori e nelle cliniche.

Ogni modello garantisce risultati di lavaggio senza pari e offre sistemi di asciugatura personalizzati, sia per carichi generici che per strumenti cavi.

Tutti i modelli condividono la stessa gamma completa di accessori di carico.



DS 5010

con **Eco drying**
larghezza 60 cm,
porta in acciaio o in vetro

DS 5011

con **Active drying**
larghezza 60 cm,
porta in acciaio

DS 5020

con **Active drying**
larghezza 90 cm,
porta in vetro

Progettata per offrire prestazioni, flessibilità e sostenibilità ai massimi livelli, la nostra nuova gamma di lavastrumenti garantisce risultati eccellenti di lavaggio e asciugatura in tutte le specialità mediche. Grazie alla connettività intelligente, all'utilizzo intuitivo e a un sistema di carico modulare, queste unità assicurano un'efficienza senza pari, un'affidabilità duratura nel tempo e un'integrazione senza soluzioni di continuità nei moderni flussi di lavoro sterili.



Alta capacità

Prestazioni eccezionali in tutte le specialità! Può contenere fino a 8 cestini DIN, 44 strumenti cavi ORL con carico aggiuntivo oppure 42 specula ORL – e molto altro.

Il sistema flessibile di supporti di carico e inserti consente configurazioni personalizzate, contribuendo a ridurre i costi di approvvigionamento e le esigenze di stoccaggio.

Conformità agli standard

La lavastrumenti è conforme agli standard internazionali EN ISO 15883-1/2/5/6.



Pronti, partenza, via!

Messa in servizio ottimizzata e posizionamento dei componenti facilmente accessibili per una manutenzione semplice.



Efficienza e facilità d'uso una combinazione vincente



Maggiore efficienza e durata

Prestazioni di lavaggio eccezionali grazie alla pompa a velocità variabile, massima affidabilità di processo grazie alla tecnologia dei sensori, igiene garantita dall'assenza di punti di accumulo nella camera e dal sistema di filtraggio multistadio.

Progettata per durare nel tempo, con una durata operativa garantita di 15.000 ore e assistenza per i ricambi per 15 anni. Un investimento che assicura un potenziamento del lavoro quotidiano per gli anni a venire.



Funzionamento semplice

Il display touch a colori offre una navigazione intuitiva, un accesso rapido ai programmi preferiti e una **chiara panoramica dello stato**. Interfaccia multilingue con cambio rapido della lingua anche durante il funzionamento e **guide pratiche sullo schermo**.

Funzione AutoClose: basta un leggero tocco per chiudere automaticamente la porta.

L'illuminazione della camera semplifica il caricamento, mentre la versione con porta in vetro (opzionale) consente il monitoraggio del processo di lavaggio in tempo reale.



Prestazioni e sostenibilità una combinazione vincente

Che si tratti di strumenti delicati o di esigenze di elevata produttività, questa gamma stabilisce nuovi standard in termini di igiene, usabilità e responsabilità ambientale.



Opzioni di asciugatura avanzate

Eco drying: Ideale per strumenti generici, riduce il consumo energetico garantendo un'asciugatura delicata. Disponibile per DS 5010.

L'apertura automatica della porta al termine del ciclo consente all'umidità residua di fuoriuscire naturalmente, accelerando l'asciugatura.

Active drying: L'asciugatura attiva ad aria calda con filtro HEPA 13 garantisce un'asciugatura rapida e accurata, ideale per ambienti ad alta produttività e strumenti complessi come quelli cavi. Disponibile per DS 5011 e DS 5020.

La manutenzione del filtro è facilitata da uno sportello situato nella parte anteriore dello zoccolo.

Pensata per l'ambiente

Ottimizzata per l'efficienza delle risorse:

- Cicli di lavaggio economici e specifici per ogni applicazione.
- Programmi brevi.
- Pompa di dosaggio integrata per un dosaggio preciso e automatico del detergente di lavaggio.

Ciò si traduce in un consumo ridotto di acqua, energia e detersivi, a sostegno di un funzionamento rispettoso dell'ambiente.

Pensata per te

Le luci di cortesia illuminano il carico e aiutano l'operatore in condizioni di scarsa illuminazione.

Carico ottimizzato. Risultati garantiti.

Massimizza la capacità della camera, migliora l'efficienza, garantisce l'affidabilità del processo



Elevata capacità

Per un riprocesso sicuro ed efficace dei dispositivi medici, l'offerta di supporti di carico, tra cui cestini superiori e inferiori, carrelli di carico e inserti, è progettata per accogliere un'ampia gamma di strumenti. Questi supporti sfruttano al meglio lo spazio della camera, consentendo di processare più strumenti e materiali per ciclo.

Maggiore efficienza

Un altro vantaggio fondamentale è l'efficiente circolazione di acqua e aria: sia il detergente che l'aria di asciugatura vengono convogliati direttamente alle giranti e ai sistemi di iniezione attraverso percorsi brevi, garantendo la massima efficacia.

La chiusura automatica delle valvole di accoppiamento quando non in uso favorisce ulteriormente le condizioni di pressione ideali.



Il tuo processo sotto controllo!

La perfetta progettazione congiunta del dispositivo di lavaggio e dei cestini di carico consente un **controllo ancora più accurato del processo**.

Il dispositivo monitora la rotazione della girante durante ogni ciclo per garantire una copertura completa del carico e risultati costantemente ripetibili.

Questa funzione è di serie su tutte le configurazioni del dispositivo!

Una macchina, infinite possibilità

Configurazioni personalizzabili con un'ampia gamma di accessori

A 203

Supporto di carico per MIC

Elementi aggiuntivi:
2x E 451, E 473, UTS



A 201

Supporto di carico per
set anestesia



A 207

Supporto di carico per cestini e
cassette per microstrumenti

Elementi aggiuntivi:
8x A 314, 8x E 197



A 104, A 151

Combinazione adatta per
strumenti MIC, artroscopia e
urologia

Elementi aggiuntivi:
2x E 142, E 379



A 105/1, A 151

Combinazione adatta per ORL

Elementi aggiuntivi:
A 837, E 373, E 374, E 417/1,
E 803, E 379



A 101, A 151

Combinazione adatta
per strumenti ortopedici

Elementi aggiuntivi:
E 142, E 473/2, E 337/1, E 521/2,
E 146, E 131/1, 6x E 197



APWD 218

Supporto di carico per
strumenti chirurgici

Include:
A 103, A 202,
E 142 (6x in A 202 or A 103)



A 210

Supporto di carico per
strumenti ginecologici

Include:
A 102, A 151, E 416 (4x A 102),
E 379



A 101, A 151

Combinazione adatta
per scarpe e solette operatore

Elementi aggiuntivi:
A 308, A 307




Flexible Loading System

Composizione dei moduli

A 101

Cestello superiore regolabile in altezza con braccio irrigatore integrato.


Altezza verticale disponibile:
160 +/- 30 mm

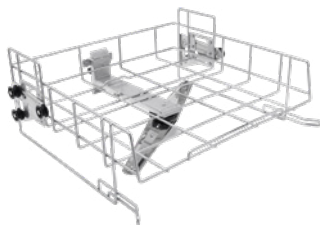

A 103

Cestello superiore con braccio irrigatore integrato. Adatto per cestini DIN.

Altezza verticale disponibile:
95 mm

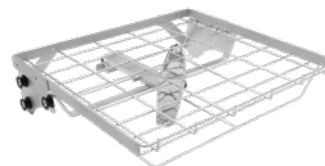

A 208

Supporto di carico per cestini DIN. Il terzo livello dal basso è rimovibile.

Altezza verticale disponibile:


Livello 4 (sopra)	75 mm
Livello 3	130 mm
Livello 2 livello 3 rimosso	200 mm
Livello 2	55 mm
Livello 1 senza griglia	100 mm
Livello 1 (inferiore)	60 mm



A 102

Cestello superiore regolabile in altezza con braccio irrigatore integrato.


Altezza verticale disponibile:
205 +/- 30 mm

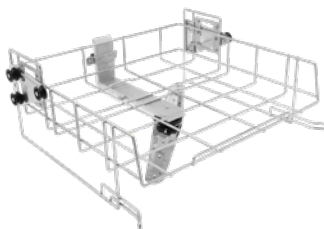

A 104

Cestello superiore con braccio irrigatore integrato. Adatto per strumenti MIC, artroscopia e urologia.

Altezza verticale disponibile:
275 mm

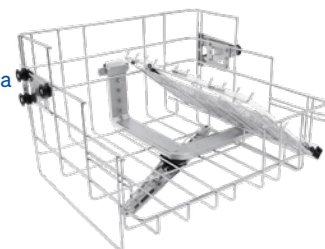

A 201

Supporto di carico per anestesia.



A 315/1


Modulo per aumentare la capacità da 22 a 44 pezzi e riprocessare strumenti a corpo cavo.



A 105/1

Cestello superiore - regolabile in altezza, senza ugelli iniettori (22 posizioni), con braccio irrigatore integrato. Ulteriore spazio libero per inserti.

Altezza verticale disponibile:
215 +/- 30 mm
185 +/- 30 mm collettore dell'iniettore

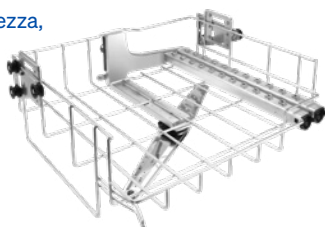

A 204

Supporto di carico per oftalmologia.

Altezza verticale disponibile:

Livello 2	280 mm
Livello 1 (inferiore)	95 mm



A 800

Filtro tubolare per collettori iniettori.



A 804

Spazzola per la pulizia del filtro tubolare A 800.



A 837

Set di irrigazione per strumenti ORL con lume.

A 203

Supporto di carico per strumenti MIS
fino a una lunghezza massima di 550 mm.

Altezza verticale disponibile:

Livello 1 (inferiore) 95 mm



A 207

Supporto di carico per vassoi con microstrumenti

Altezza verticale disponibile:

Livello 3 220 mm
Livello 2 60 mm
Livello 1 (inferiore) 95 mm



A 314

Cestino per strumenti oftalmologici - adatto
per strumenti cavi e non.

A 202

Supporto di carico per cestini in rete DIN
Può essere utilizzato in combinazione con
il cestello superiore A 103

Altezza verticale disponibile:

Livello 2 135 mm
Livello 1 senza la griglia 135 mm
Livello 1 (inferiore) 95 mm




A 151

Cesto inferiore

Altezza verticale combinazioni:

A100 240 mm
A101 265 +/- 30 mm
A102 225 +/- 30 mm
A103 305 mm
A104 145 mm
A105 210 mm

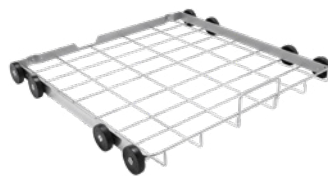

A 310

Supporto per max. 8
zoccoli operatore,
fino alla taglia 41



A 307

Supporto per max. 20
zoccoli operatore,
fino alla taglia 48



A 308

Inserto per un
massimo di 34 solette
per zoccoli operatore

Elementi multi-applicazione



E 451

Vassoi a rete per vari
strumenti



E 473/2

Cesto a maglie fini per
piccoli oggetti



E 337/1

Inserto per strumenti
verticali



UTS

Scatola a 3 scomparti
con coperchio per la
pulizia di piccole parti.



E 142

Vassoio DIN a rete



E 373

Inserto a maglie fini con
coperchio



E 379

Inserto maglie fini per
6 specula da uno o
due pezzi



E 374

Inserto maglie fini per
strumenti ORL



E 131/1

Inserto per 5 vassoi a
rete o ciotole reniformi




E 146

Inserto maglie fini con
coperchio per strumen-
ti ginecologici e ORL




E 416

Inserto per 6 specula
da una o due parti

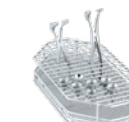

E 803

Inserto rete - fino a 30
specula auricolari e
nasali

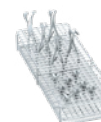

E 417/1

Inserto per speculum
auricolare/nasale

Praticità ed efficacia nei più piccoli dettagli

Le immagini rappresentano solo alcuni esempi
del design avanzato degli accessori Steelco.



Connessioni girevoli anti-
torsione per
una facile connessione
degli strumenti,
escludendo restrizioni del
flusso.

Supporti, carrelli di trasporto e componenti per lo stoccaggio

UG 30-60/60-85/1

Zoccolo, chiuso per sollevare la macchina, profondo 60 cm, largo 60 cm



UG 30-90/60-85/1

Base chiusa con funzione di sollevamento macchina, comprensiva di mobile laterale. Dimensioni complessive: 60 cm di profondità, 90 cm di larghezza.



UG 70-60/80/1

Telaio inferiore con sportello per carico e scarico ergonomico della lavastrumenti - altezza 70 cm



MC/2

Carrello di trasporto



PG 8596

Mobiletto per moduli di dosaggio e prodotti chimici. Capacità: Livello superiore: 3 x 5 L Livello inferiore: 3 x 5 L o 2 x 10 L



Dimensioni e configurazioni

Modello	Altezza	Profondità	Larghezza	Porta	Asciugatura
DS 5010	820 mm	598 mm	598 mm	Vetro Acciaio inox	Eco
DS 5011	820 mm	598 mm	598 mm	Acciaio inox	Active
DS 5020	820 mm	598 mm	898 mm	Vetro	Active



Connettività intelligente

Integrato con SmartHub


I tuoi dispositivi ti parlano. Li stai ascoltando?

Raccogliere i dati dalle tue apparecchiature tramite software di data logging è fondamentale per ottimizzare i flussi di lavoro. Ma che dire degli strumenti? Tracciare gli strumenti durante tutto il loro ciclo di vita in ospedale – dall'uso sul paziente al riprocesso nella centrale di sterilizzazione (CSSD) o in centri esterni, fino al successivo utilizzo – è essenziale per la sicurezza del paziente. I nostri software SmartHub consentono di raccogliere, archiviare e analizzare facilmente e automaticamente i dati delle tue macchine, fornendoti al contempo gli strumenti per tracciare e documentare lo storico, la posizione e l'utilizzo dei dispositivi medici lungo tutto il loro ciclo di vita.

SmartHub Orbit in sintesi

Con SmartHub Orbit, tutti i dati rilevanti delle macchine e gli stati dei cicli sono accessibili da qualsiasi dispositivo, ovunque e in qualsiasi momento. Questo offre ai responsabili dei processi di sterilizzazione il pieno controllo e trasformerà il loro modo di lavorare, offrendo:

- Trasparenza sullo stato dei dispositivi di lavaggio e la sterilizzazione in tempo reale.
- Documentazione aggiornata dei lotti e notifiche sui dispositivi, sempre e ovunque.

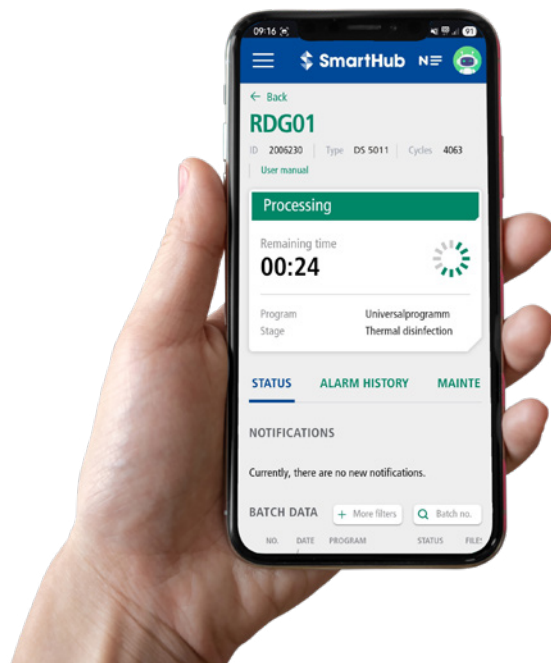

La trasformazione digitale non si ferma!

Sviluppiamo costantemente le nostre soluzioni digitali per il riprocesso intelligente degli strumenti nelle cliniche. Chiedi al tuo rappresentante commerciale l'elenco delle ultime novità disponibili.

Massimizza le prestazioni

grazie agli esperti SteelcoBelimed

Con una rete globale di oltre 1.000 tecnici certificati e partner di fiducia, SteelcoBelimed offre un supporto tecnico rapido, affidabile e disponibile in loco per garantirti un flusso di lavoro continuo, senza interruzioni.

I nostri team si trovano in zone chiave e hanno una profonda competenza nelle esigenze operative di ospedali, aziende farmaceutiche e laboratori di ricerca. Che si tratti di manutenzione ordinaria, assistenza di emergenza o ottimizzazione delle prestazioni, rispondiamo con precisione e rapidità.

Soluzioni di assistenza

I nostri piani di assistenza personalizzati massimizzano i tempi di attività delle apparecchiature con una manutenzione preventiva basata sull'utilizzo. Le opzioni includono visite programmate, riparazioni e ricambi, con servizi aggiuntivi come la pulizia della camera e il monitoraggio della qualità dell'acqua per migliorare prestazioni ed efficienza.

Soluzioni TCO

I nostri contratti Total Cost of Ownership offrono piani di assistenza pluriennali a costo fisso che garantiscono stabilità di budget, riducono i costi operativi e prolungano la durata delle apparecchiature, offrendo valore a lungo termine e supportando gli obiettivi di sostenibilità.

Training tecnico riconosciuto

La nostra formazione tecnica certificata combina lezioni in aula e apprendimento pratico per fornire al tuo team le competenze necessarie per utilizzare, mantenere e risolvere i problemi delle apparecchiature. Le classi di piccole dimensioni garantiscono un insegnamento personalizzato e i partecipanti ricevono un attestato al termine del corso, potenziando le competenze e riducendo al minimo i tempi di inattività.

Soluzioni di digitalizzazione

Le nostre soluzioni digitali offrono monitoraggio in tempo reale, dashboard intuitive e avvisi automatici per aiutare i team di assistenza a rilevare tempestivamente i problemi e pianificare la manutenzione in modo più efficace. Integrando questi strumenti nelle operazioni quotidiane, le strutture possono ridurre i tempi di fermo, migliorare l'affidabilità e prendere decisioni più intelligenti basate sui dati.

SteelcoBelimed

Miele Group Member

SteelcoBelimed  Group Member

Innovate with confidence

DC-PD-02-Steelco DS 5010-11-20 IT Rev.00.pdf

I prodotti offerti in vendita potrebbero differire da quelli descritti o illustrati in questa brochure a causa di successive modifiche di produzione e/o configurazioni opzionali. I prodotti e le specifiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso. Si prega di contattare il proprio rivenditore SteelcoBelimed per informazioni aggiornate.

Steelco S.p.A.
Via Balegante, 27 - 31039
Riese Pio X (TV) - Italy

steelcobelimed.com



* Marcatura CE dell'UE con organismo notificato. La relativa dichiarazione di conformità è allegata alla macchina e può essere richiesta al produttore.