

CSSD mobile

per la continuità del riprocesso degli strumenti durante la ristrutturazione del CSSD



Produttore e fornitore globale di soluzioni per il lavaggio e la sterilizzazione

Nata dall'unione di Steelco e Belimed, SteelcoBelimed è pioniera nelle soluzioni per i flussi sterili, con innovazione, affidabilità e attenzione al cliente. "Innovate with confidence" esprime il nostro impegno per prodotti e servizi di alta qualità, stabilendo nuovi standard nel settore del Controllo delle Infezioni e delle Scienze della Vita.

Il cliente al centro

Il nostro impegno è comprendere pienamente le esigenze e la soddisfazione dei clienti. I nostri prodotti e servizi sono progettati per rispondere a queste necessità specifiche, assicurando che ogni decisione che prendiamo porti benefici ai clienti per ottenere i migliori risultati.

Innovazione

La nostra dedizione al progresso ci spinge a cercare e abbracciare costantemente nuove idee, tecnologie e metodi. Questo impegno garantisce che i nostri prodotti e servizi evolvano e migliorino continuamente.

Sostenibilità



Il nostro pianeta, la nostra responsabilità. In SteelcoBelimed, la sostenibilità è parte integrante di tutto ciò che facciamo: dall'ottimizzazione dei processi produttivi e la riduzione dei consumi energetici alla creazione di prodotti che favoriscono la tutela ambientale. Per noi, proteggere il futuro significa agire oggi. Con integrità, determinazione e profondo rispetto per le persone e per il pianeta.

Affidabilità

Il nostro impegno è raggiungere i più alti livelli di produttività attraverso l'ottimizzazione di processi, risorse e operazioni. Fornendo costantemente soluzioni affidabili, garantiamo la creazione di valore riducendo al minimo le inefficienze. Il nostro obiettivo è instaurare relazioni durature basate su fiducia, integrità e rispetto reciproco, adempiendo con affidabilità ai nostri impegni.

CSSD mobile

La sfida di fornire continuità nel riprocesso degli strumenti durante i lavori di costruzione

I lavori di costruzione nel reparto CSSD degli ospedali possono influire sulla fornitura costante di strumenti ricondizionati in termini di igiene, qualità, tempi e costi.

In passato, gli ospedali potevano scegliere tra le seguenti opzioni:

Esternalizzazione temporanea del riprocesso degli strumenti: l'esternalizzazione su larga scala del riprocesso degli strumenti comporta il rischio di una diminuzione della qualità e di interruzioni nella fornitura di set di strumenti alle sale operatorie e ai reparti. Allo stesso tempo, i dipendenti devono essere pagati.

Aggiornamento in fasi durante il lavoro o soluzione provvisoria in locali alternativi: l'aggiornamento richiede generalmente tempi molto più lunghi rispetto a un reparto in cui il lavoro viene temporaneamente interrotto. Le misure in loco necessarie per soddisfare i severi requisiti igienici (ad esempio, pareti divisorie a prova di polvere) sono impegnative e sottopongono il personale del CSSD a un notevole stress (ad esempio, i livelli di rumore).

Una soluzione provvisoria in strutture prefabbricate: è probabile che un CSSD provvisorio debba essere allestito e successivamente smontato, con grande sforzo e tensione per tutti gli interessati. In molti casi, lo spazio per soluzioni provvisorie a una distanza gestibile dalle sale operatorie e dai reparti non è possibile.

1 giorno di installazione




La risposta di Steelco alle vostre esigenze temporanee:

un modulo singolo, prefabbricato, chiavi in mano CSSD

I lavori di costruzione nel Reparto Centrale di Rifornimento Sterile (CSSD) di un ospedale possono influire sulla fornitura costante di strumenti riprocessati in termini di igiene, qualità, tempi e costi. Per rispondere alla sfida di garantire la continuità del ricondizionamento degli strumenti durante i lavori di costruzione, offriamo un CSSD chiavi in mano completamente funzionante e convalidato per uso temporaneo.

CSSD mobile 70

Singola unità mobile in grado di trattare fino a 70.000 STU all'anno con i più alti standard di risultato.

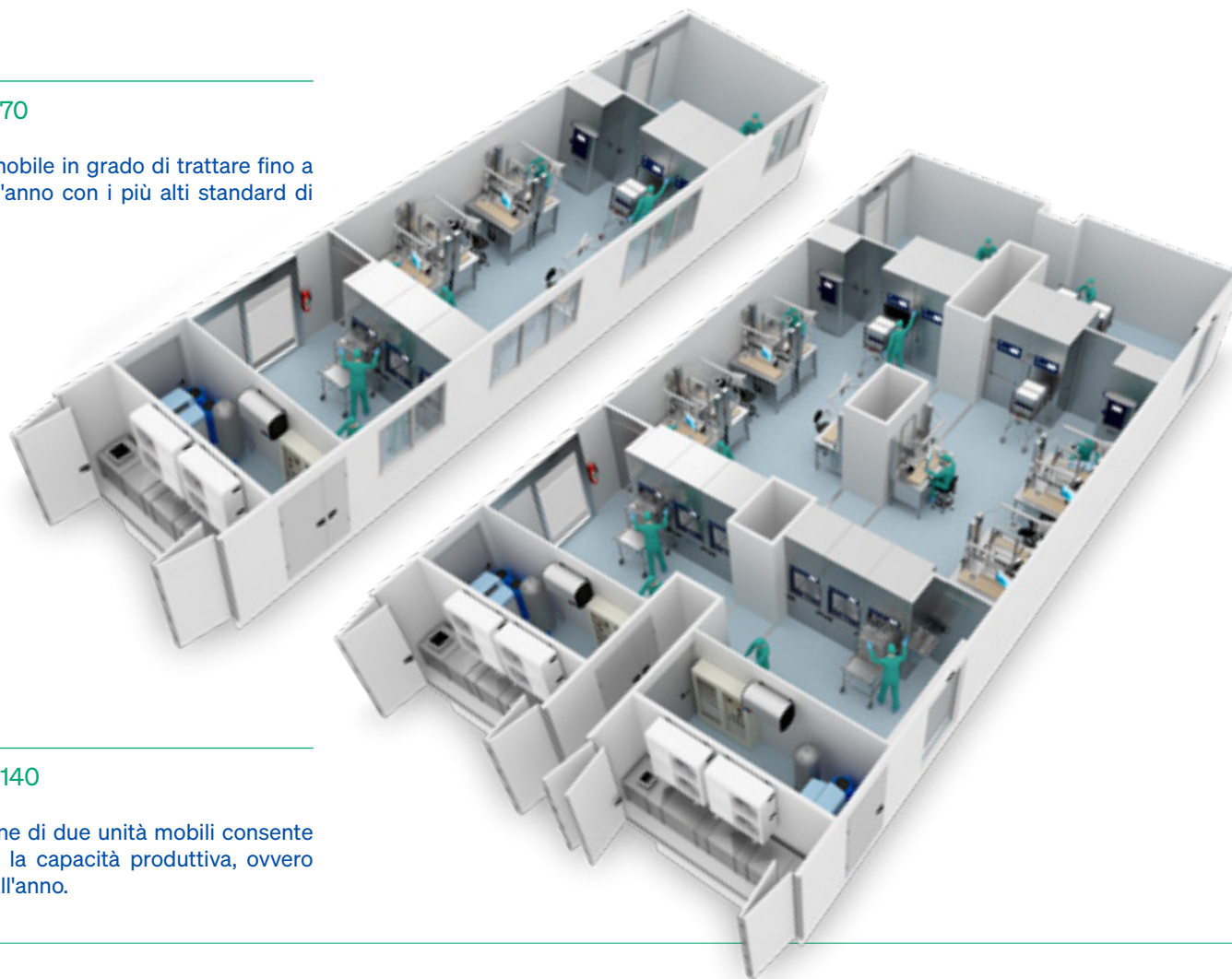

CSSD mobile 140

La combinazione di due unità mobili consente di raddoppiare la capacità produttiva, ovvero 140.000 unità all'anno.

Un solo giorno di lavoro

Il CSSD mobile può essere allestito in un solo giorno lavorativo. Inoltre, il personale del CSSD non sarà esposto alle tensioni e allo stress di un cantiere. L'impegno complessivo da parte dell'ospedale è di gran lunga ridotto rispetto a qualsiasi altra opzione, sia in termini di carico di lavoro che di economia.

Soluzione chiavi in mano

L'impianto è dotato di tutti i locali e le attrezzature tecniche e il cliente è responsabile solo delle forniture e delle utenze (acqua, elettricità, allacciamenti alle acque reflue), dei materiali di consumo (prodotti chimici di processo, materiale di confezionamento) e del personale.

Economico


Il costo è notevolmente inferiore, anche se dipende dal periodo di noleggio e dal costo del trasporto su strada, dell'installazione, della messa in funzione e della convalida, se confrontato con le tariffe di mercato per STU (unità di sterilizzazione) applicate da società di riprocesso terze. La soluzione mobile CSSD si ripaga in tempi brevissimi.

Soluzione tecnologica di alto livello

perfettamente adattata per una produttività fino a 16 unità sterili all'ora

Area sporca

Pre-lavaggio
Caricamento delle lavastrumenti
Pre-lavaggio a ultrasuoni (opzione)

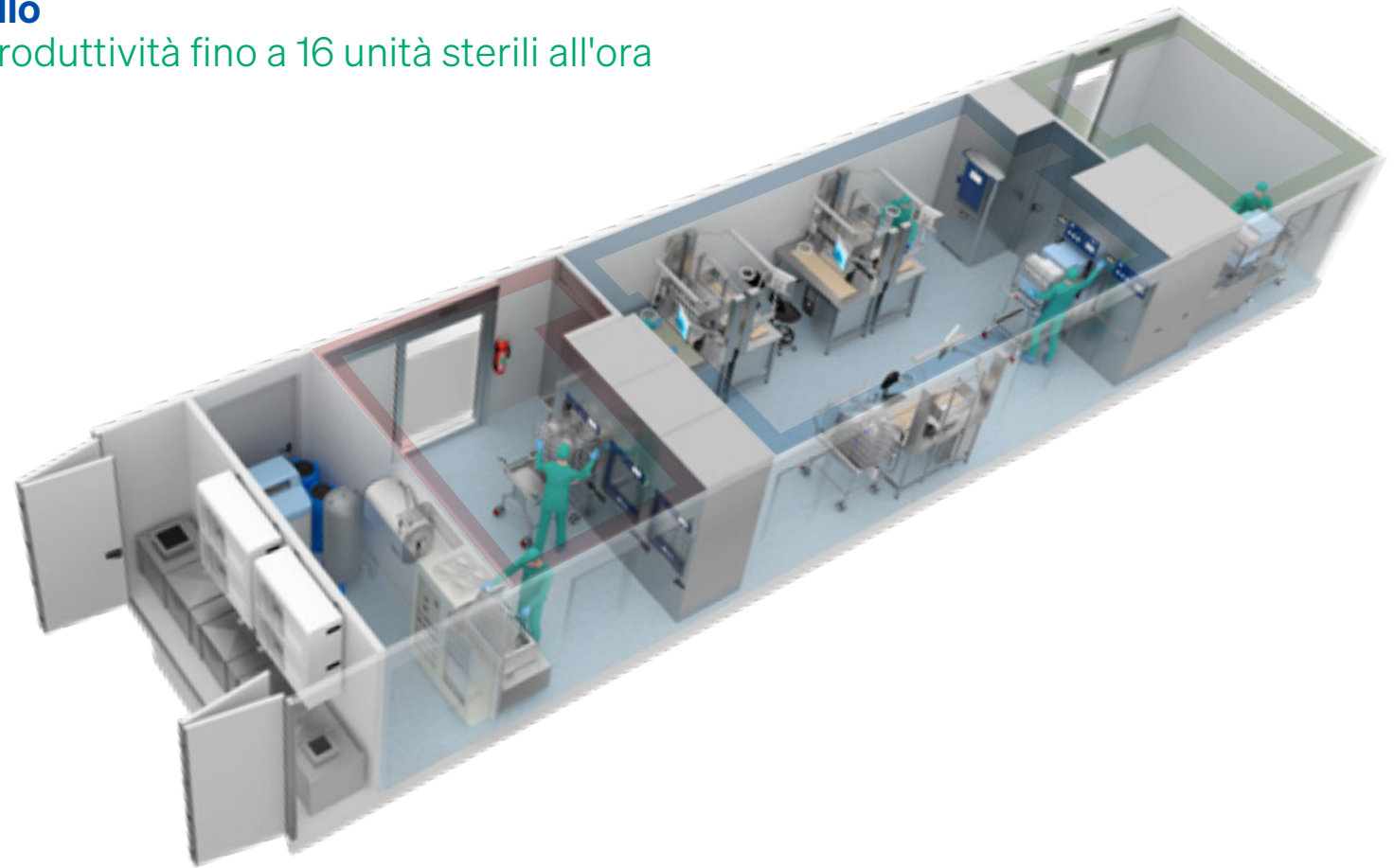

Area pulita

Tavoli di imballaggio



Area pulita

Scarico delle lavastrumenti



Area pulita

Carico sterilizzatori



Area Sterile

Scarico sterilizzatori



Il CSSD mobile di Steelco

è la scelta giusta dal punto di vista economico

Infrastruttura CSSD completa

- Edificio completamente attrezzato progettato per un CSSD completo
- Layout a 3 zone con flusso d'aria controllato e sovrappressione nell'area di confezionamento
- Sistemi integrati di condizionamento dell'aria e di pretrattamento dell'acqua
- Area dedicata al prelavaggio manuale
- Cinque tavoli di confezionamento regolabili in altezza
- Apparecchiatura a ultrasuoni opzionale

Lavaggio automatico

3 unità Steelco PWD 8626 Capacità: 15/18 vassoi DIN 1/1

Efficienza e produttività senza pari. Le lavatrici includono i rack modulari del Flexible Loading System e la tecnologia Power Pulse Cleaning per ridurre il trattamento manuale di prelavaggio di strumenti complessi.




Sterilizzazione a vapore

2 unità Steelco VS G2 8/2 - Capacità: 8 STU

Dotato delle più avanzate opzioni Eco per migliorare l'efficienza e la produttività. Gli sterilizzatori includono l'esclusivo sensore 4D di Steelco per monitorare la saturazione e la penetrazione del vapore in ogni carico di sterilizzazione.



Il costo di un CSSD mobile temporaneo è notevolmente inferiore, anche se dipende dal periodo di noleggio e dai costi di trasporto su strada, installazione, messa in funzione e convalida, rispetto alle tariffe di mercato per STU (unità di sterilizzazione) applicate da società di riprocesso terze. La soluzione Mobile CSSD 70 di Steelco si ripaga in tempi brevissimi.

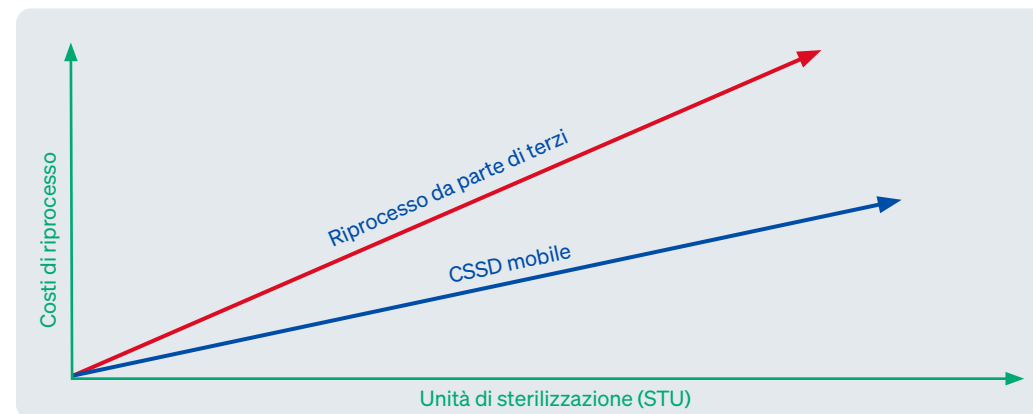

Sterilizzazione H₂O₂ a bassa temperatura

1 unità Steelco PL 130/2 Capacità: 148 litri

Sterilizzatore a cartuccia singola a bassa temperatura che consente un'ampia flessibilità nei cicli, da dispositivi medici generici riutilizzabili fino a strumenti flessibili lunghi 2200 mm a triplo canale, con diametri di canale di 0,5 mm.



Massimizza le prestazioni grazie agli esperti SteelcoBelimed

Soluzioni di assistenza

Prevenire è meglio che curare. I nostri piani di assistenza personalizzati garantiscono la massima operatività delle apparecchiature attraverso interventi di manutenzione preventiva studiati in base all'utilizzo dei dispositivi. Che si tratti di tecnici interni o del nostro team di esperti, le diverse soluzioni possono includere visite programmate di manutenzione preventiva, riparazioni e ricambi, a seconda delle opzioni scelte. Servizi opzionali, come la pulizia della camera e il monitoraggio della qualità dell'acqua, contribuiscono a ottimizzare le prestazioni e a controllare i costi, mantenendo le vostre operazioni fluide ed efficienti. Contattate il vostro rappresentante SteelcoBelimed per conoscere la gamma di servizi disponibili nella vostra area.

SteelcoBelimed Academy

SteelcoBelimed Academy offre un'ampia gamma di opzioni formative, pensate per rispondere alle esigenze specifiche dei professionisti delle centrali di sterilizzazione (CSSD). La struttura di formazione all'avanguardia di Riese, in Italia, serve le divisioni SteelcoBelimed Infection Control, Laboratory e Biomedical Research (BMR), con l'impressionante capacità di formare fino a 1.100 tecnici di assistenza all'anno. L'Academy rappresenta il nostro impegno a far progredire l'intero settore della sterilizzazione. I professionisti sanitari che si formano qui acquisiranno competenze che vanno oltre il semplice utilizzo delle apparecchiature, includendo la scienza del controllo delle infezioni e l'ottimizzazione dei flussi di lavoro nella sterilizzazione. Queste conoscenze si traducono direttamente in una maggiore sicurezza per i pazienti e in una migliore efficienza operativa nelle loro strutture.

Contratti TCO (Total Cost of Ownership)

I nostri contratti TCO offrono una soluzione di assistenza pluriennale a costo fisso, garantendo stabilità di budget e valore a lungo termine. Bloccando le tariffe e riducendo l'esposizione all'aumento dei costi, questi contratti consentono una pianificazione finanziaria chiara. Ideali per prolungare la vita delle apparecchiature, i pacchetti all-inclusive riducono i costi operativi, proteggono gli investimenti e supportano gli obiettivi di sostenibilità lungo l'intero ciclo di vita delle macchine.

Digitalizzazione nelle Operazioni di Assistenza

Le nostre soluzioni digitali consentono di accedere ai dati delle apparecchiature in tempo reale, aiutando i team di assistenza a monitorare le prestazioni e a identificare più rapidamente eventuali problemi. Dashboard intuitive e avvisi automatici rendono la manutenzione più predittiva ed efficiente. Questi strumenti favoriscono una migliore pianificazione, riducono i fermi imprevisti e semplificano la conformità normativa. Integrando i flussi di lavoro digitali nelle routine di assistenza, le strutture possono migliorare l'affidabilità e prendere decisioni più informate basate sull'effettivo utilizzo e sull'andamento delle performance.

SteelcoBelimed

Miele

Group Member

Innovate with confidence

DC-PD-02-Steelco Mobile CSSD IT Rev.02

I prodotti in vendita possono differire da quelli descritti o illustrati in questo opuscolo a causa di modifiche successive alla produzione e/o di configurazioni opzionali.

I prodotti e le specifiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso. Per informazioni aggiornate, consultare il proprio rivenditore Steelco.

Steelco S.p.A.
Via Balegante, 27 - 31039
Riese Pio X (TV) - Italy

steelcobelimed.com